


# WiScope®

## Flexibles Zystoskop zum Einmalgebrauch

Eine leistungsstarke Alternative, die immer betriebsbereit ist, aber

- ▶ ohne das Risiko der Kreuzkontamination
- ▶ ohne eigene Sterilisation, Reparatur und mikrobiologische Kontrolle
- ▶ ohne Ausfallzeiten

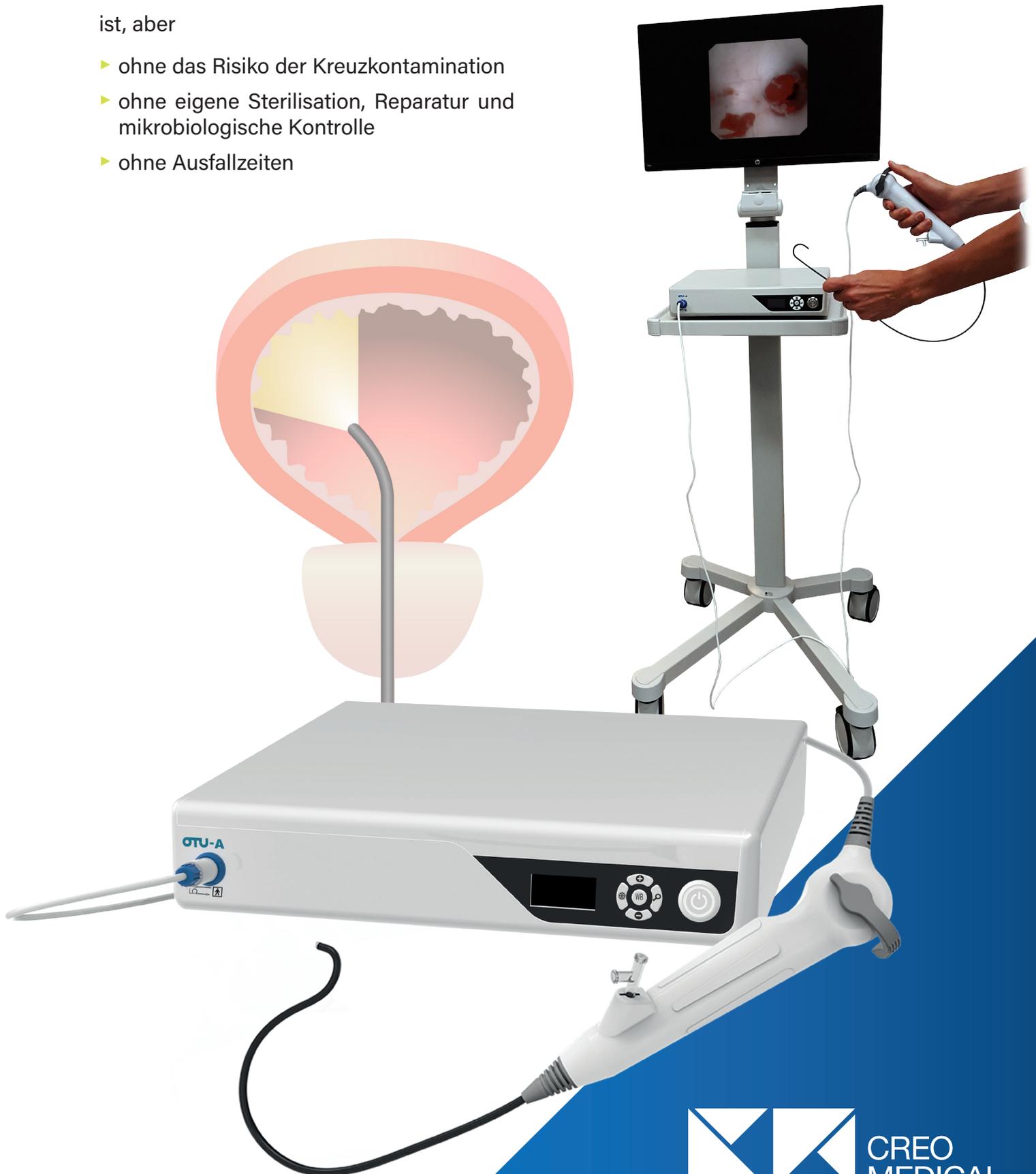


# WiScope® Zystoskop

Ein leistungsstarkes, sofort verfügbares und 100% funktionales Gerät für Ihre zystoskopischen Eingriffe. Das Zystoskop **WiScope** ist nicht nur sofort verfügbar, sondern auch zum einmaligen Gebrauch geeignet:

- ▶ Schnelle Abfolge von Interventionen
- ▶ Bewältigung von Notfällen
- ▶ Eliminierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- ▶ Gewährleistung der erwarteten Leistung in Bezug auf Anwendung und Bildqualität


Darüber hinaus wird das **WiScope** Einweg-Zystoskop mit demselben Bildgebungssystem wie das **WiScope** Ureteroskop verwendet.

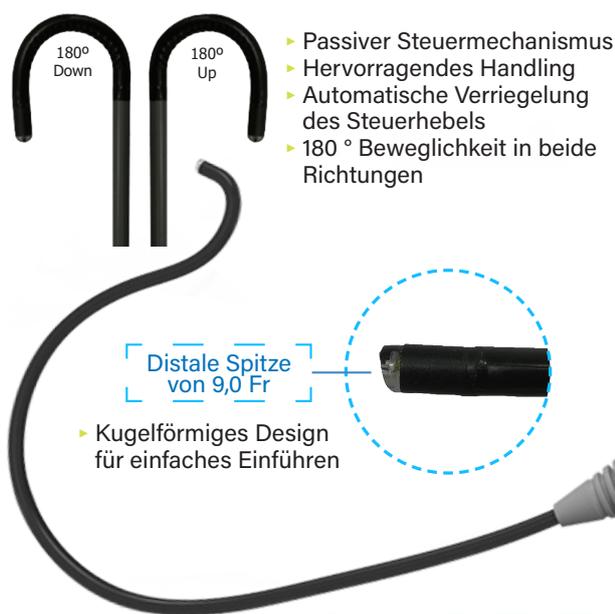


- ▶ Passiver Steuermechanismus
- ▶ Hervorragendes Handling
- ▶ Automatische Verriegelung des Steuerhebels
- ▶ 180 ° Beweglichkeit in beide Richtungen



- Distale Spitze von 9,0 Fr**
- ▶ Kugelförmiges Design für einfaches Einführen

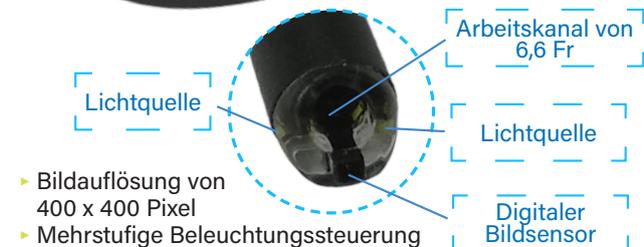

- ▶ Bildauflösung von 400 x 400 Pixel
- ▶ Mehrstufige Beleuchtungssteuerung

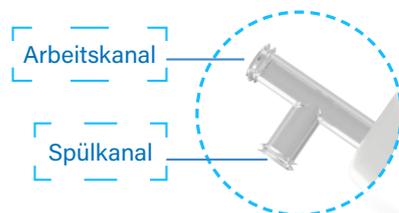

- ▶ Ermöglicht die simultane Benutzung des Arbeits- und Spülkanals.



\* Sehr leichter Griff



- ▶ Ultradünner Schaftdurchmesser erleichtert die Einführung und minimiert das Verletzungsrisiko des Patienten
- ▶ 1:1 Übertragung der Griffbewegungen auf das distale Ende

Artikelnummer	Rechtshänder/ Linkshänder	Steuerung	
00060014	rechtshändig	normal	Steuerhebel „nach distal“ - distales Ende „auf“
00060013	linkshändig	normal	Steuerhebel „nach proximal“ - distales Ende „ab“
00060012	rechtshändig	invers	Steuerhebel „nach distal“ - distales Ende „ab“
00060011	linkshändig	invers	Steuerhebel „nach proximal“ - distales Ende „auf“
00060001	WiScope Image System - Zystoskop & Ureteroskop		

**Bezeichnung:** Flexibles Einmal-Zystoskop WISCOPE®. **Anwendung:** Diagnostische und therapeutische Operationen in den unteren Harnwegen und der Blase **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hers-teller:** Ningbo Wise OptoMech Technology Corporation. **Anwendungshinweise:** Lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung und folgen Sie den Hinweisen des Geräts und auf der Etikettierung. **Erstattung:** keine **Version:** WSC\_G\_2. Rev.02 Date 15-07-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

**Creo Medical GmbH**  
Hans-Böckler-Str. 29  
40764 Langenfeld, Deutschland  
Email: info.de@creomedical.com  
Tel. +49 21 73 200 47 0

