


SmartScale - Aros - SmartFlow

Débitmètre

- ▶ Diagnostic non invasif
- ▶ Plusieurs solutions pour différentes exigences

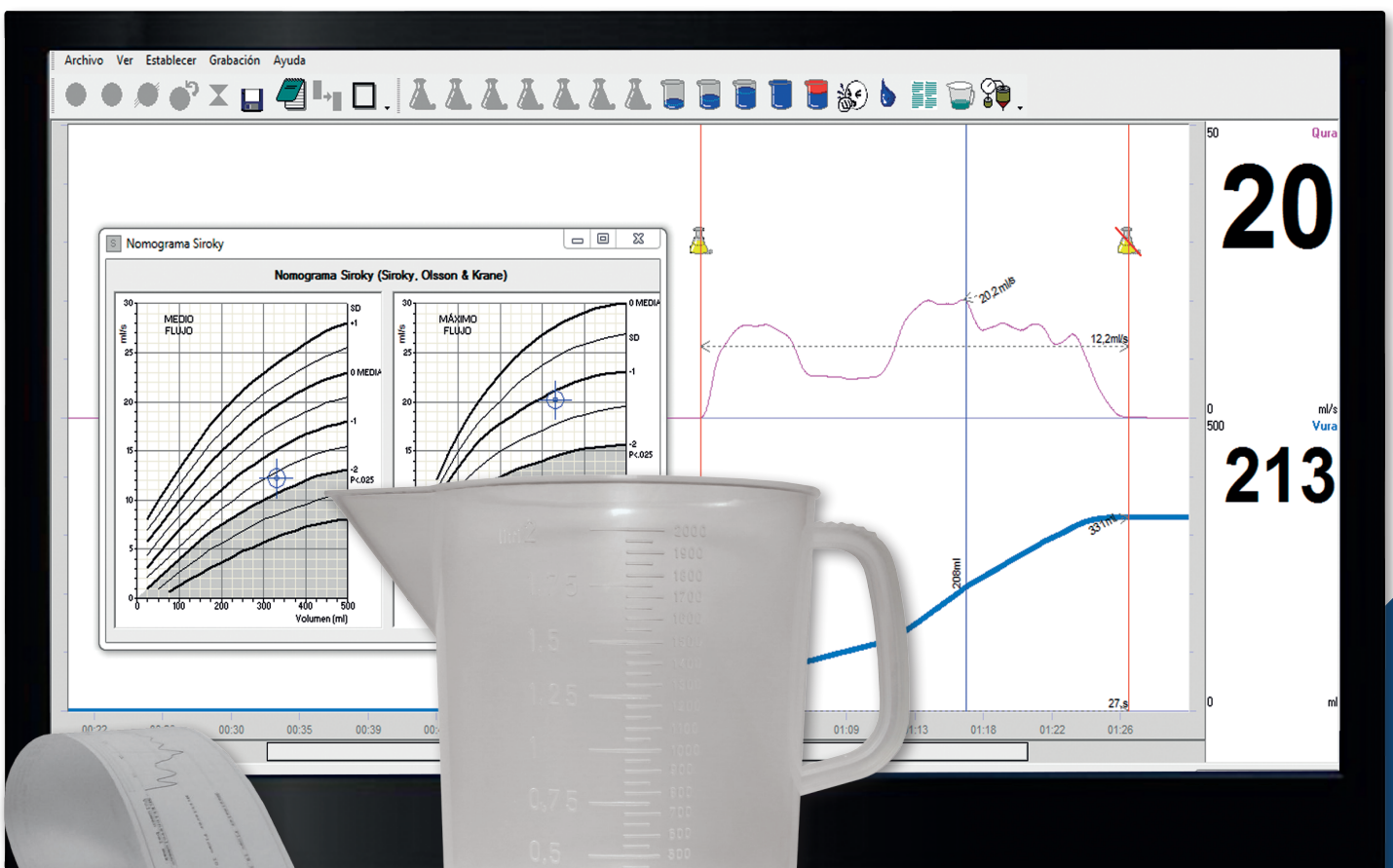

SmartScale – PC Flow

Le débitmètre informatisé sans fil

Avantages du SmartScale:

- ▶ Sans fil, utilisation et entretien faciles.
- ▶ Détection automatique de miction.
- ▶ Application Phoenix avec base de données SQL.
- ▶ Analyse complète, nomogrammes ICS (Liverpool, Siroky et pédiatrique).
- ▶ Précision des mesures et qualité des comptes-rendus.
- ▶ Le capot plastique transparent protège le capteur des éclaboussures et facilite l'entretien.



98800002

SmartScale



Aros – Flow-EMG

Association de la mesure de débit SmartScale et de l'EMG

Avantages de l'Aros:

- ▶ Aros combine l'EMG et tous les avantages du **SmartScale**.
- ▶ EMG sans fil synchronisé avec le capteur de débitmétrie.
- ▶ EMG rechargeable par un port USB de l'ordinateur.
- ▶ Logiciel Biofeedback et sondes adaptées en option.

98400000


Aros

SmartFlow

Le débitmètre de consultation sans fil

Avantages du SmartFlow:

- ▶ Utilisation simple, fonctionnement entièrement automatique.
- ▶ Filtrage numérique conservant la dynamique du débit.
- ▶ Détection du début de miction (débit > 0.75ml/s).
- ▶ Temps d'arrêt variable en fonction de la débitmétrie mesurée.
- ▶ A la fin de la miction, le **SmartFlow** est immédiatement prêt pour la miction suivante.
- ▶ Visualisation en temps réel sur l'écran tactile.
- ▶ Analyse et impression automatique de la courbe de débitmétrie annotée.
- ▶ Mémorisation des 4 dernières débitmétries, copies de compte-rendu.
- ▶ Le capot plastique transparent protège le capteur des éclaboussures et facilite l'entretien.
- ▶ Option: installation murale.
- ▶ Option: PC-link permettant de connecter SmartFlow à notre logiciel Phoenix: sauvegarde, analyse, comptes-rendus.

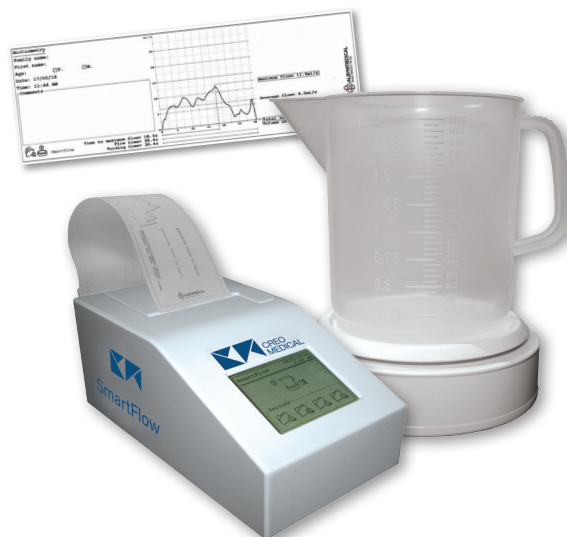

00004440

SmartFlow

Dénomination: Débitmètres urinaires de consultation. **Indications:** Etude de la miction. **Classe:** IIa. **Organisme notifié:** SGS. **Fabricant:** Creo Medical. **Bon usage:** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation du dispositif. **Remboursement:** Produit non inscrit à la LPPR. **Version:** FM_F_3 Rev.03 Date 25-04-24

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

