

ScopeClip

Einweg-Hämoclip

Verschiedene Verbesserungen wurden bei dieser neuesten Generation von hämostatischen Clips erzielt:


- ▶ Ein besserer Halt im Gewebe
- ▶ Eine größere Schließkraft
- ▶ Die Möglichkeit der Extraktion, falls erforderlich




Repositionierbar



Rotierbar

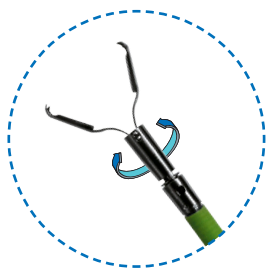

Abnehmbar

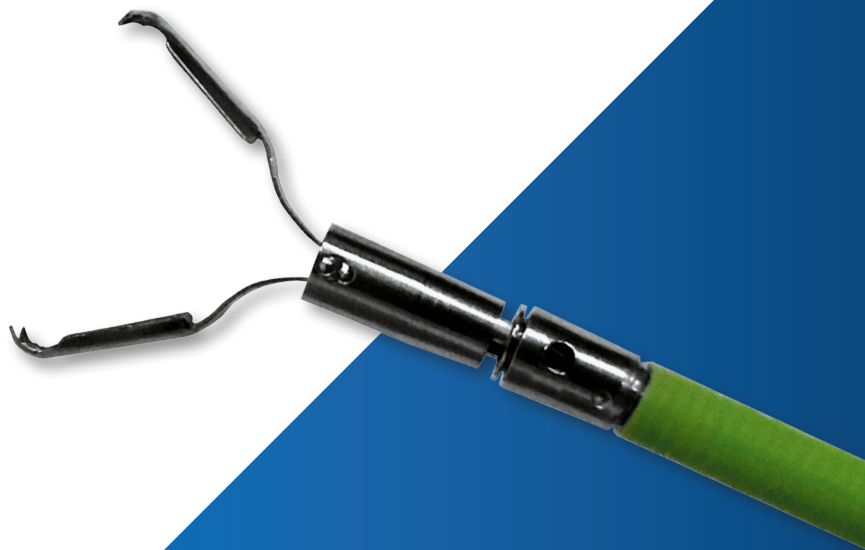


ScopeClip Einweg-Hämoclip


ScopeClip - Rotierbarer, repositionierbarer und abnehmbarer Einweg-Hämoclip

Referenz	Clip-Öffnung (mm)	Clip-Winkel	Katheter-Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Farbcode	Menge
HC-23091355108	9	135°	2,6	2300	Dunkelblau	10
HC-23111355104	11	135°	2,6	2300	Grün	10
HC-231313551018	13	135°	2,6	2300	Violett	10
HC-231613551044	16	135°	2,6	2300	Hellblau	10

Merkmale

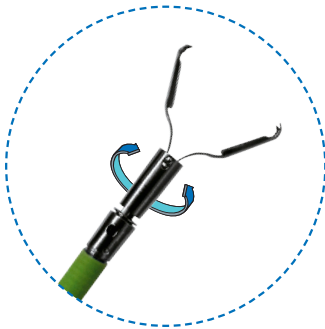

- ▶ **Rotierbar:** 360°-Drehung in zwei Richtungen für einen besseren Krüpfungswinkel, der eine bessere Handhabbarkeit und eine exakte Positionierung bietet.

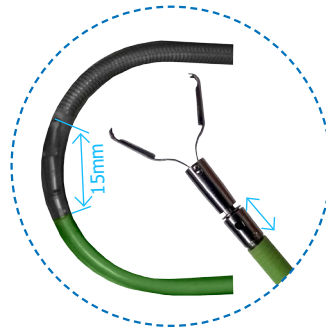

- ▶ **Kürzeres distales Ende:** zur Erleichterung des Clips durch den Arbeitskanal bei starker des Endoskops.



- ▶ **Repositionierbar:** Möglichkeit, die Klemme zur genaueren Positionierung bis zu 5 Mal zu öffnen und zu schließen.



- ▶ **Besserer Gewebegriff und größere Schließkraft:** Verhindern Sie Gewebeleckagen beim Schließen der Klemme und erhöhen Sie den Grad der Gewebekompaktion für einen besseren Gefäßverschluss.



- ▶ **Abnehmbar:** Falls erforderlich (der Clip ist falsch positioniert, der Clip löst sich auch nach einiger Zeit nach seiner Platzierung nicht leicht vom Gewebe), kann der Clip mit einem Polypektomie-Handgriff wieder geöffnet und entfernt werden, ohne das Gewebe zu beschädigen.

Bügel zum Herausziehen des ScopeClip Hämoclips

Referenz	Ø Mantel (mm)	Länge (cm)	Ø Bügel (mm)	Form des Bügels	Rotativ	Menge
HPS-2425235075	2,4	230	25	Oval	✓	10

Beschreibung: Hämostatische Klammer für den Einmalgebrauch. **Indikationen:** Endoskopische Platzierung von Clips zur Hämostase oder Markierung. **Klasse:** IIb. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS MedTech Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SCL_G_5. Rev.05. Date 17-05-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

