


ScopeClip

Hemoclip de un solo uso

Nuestra gama de clips se está ampliando para ofrecerle una mayor variedad y satisfacer sus diferentes necesidades y requerimientos.

En esta última generación de hemoclips, se han hecho varias mejoras con los siguientes objetivos:

- ▶ Un mejor agarre de los tejidos.
- ▶ Una mayor fuerza de cierre.
- ▶ La posibilidad de extraerlo, si es necesario.

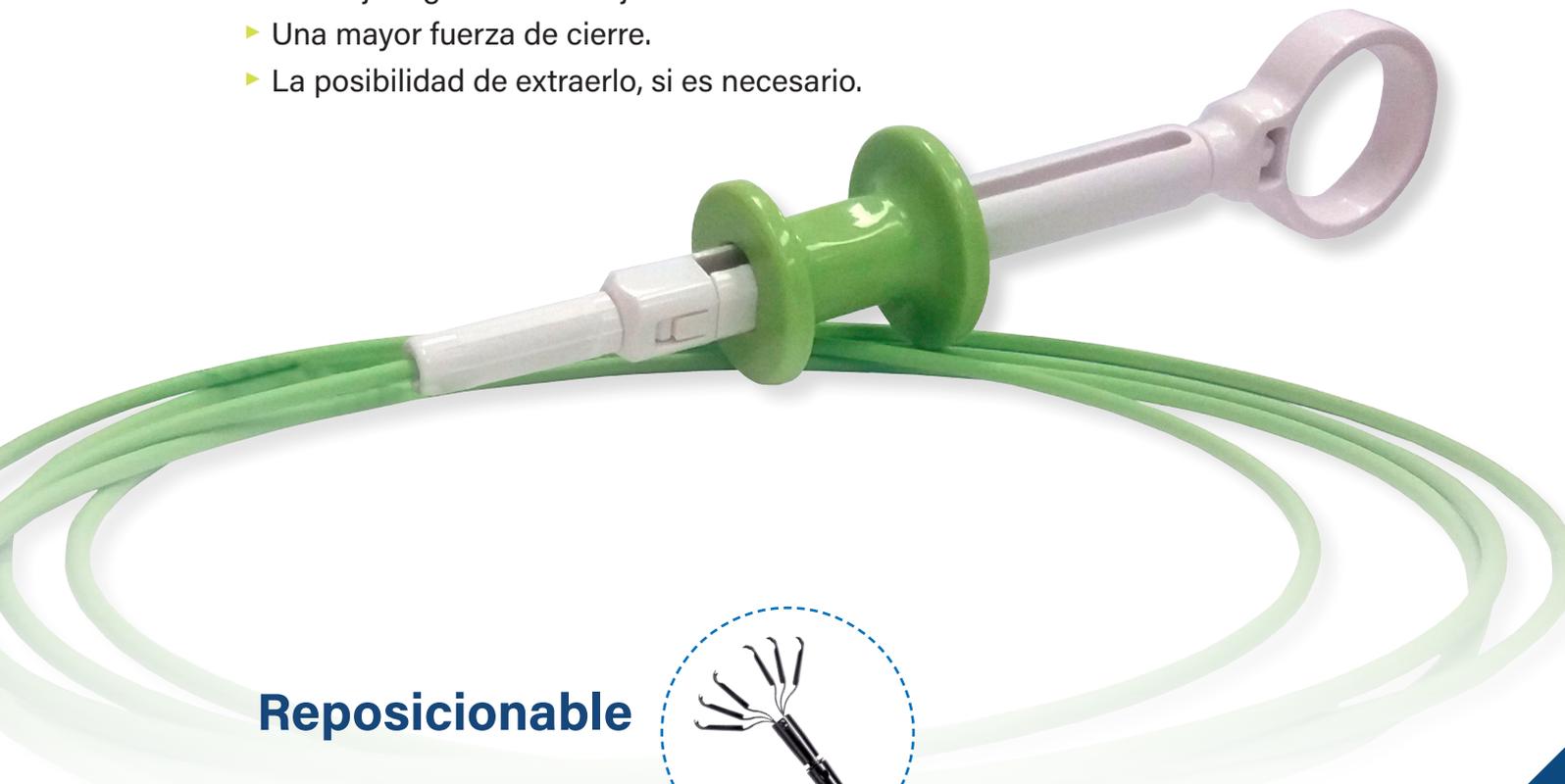


Reposicionable



Rotativo



Extraíble

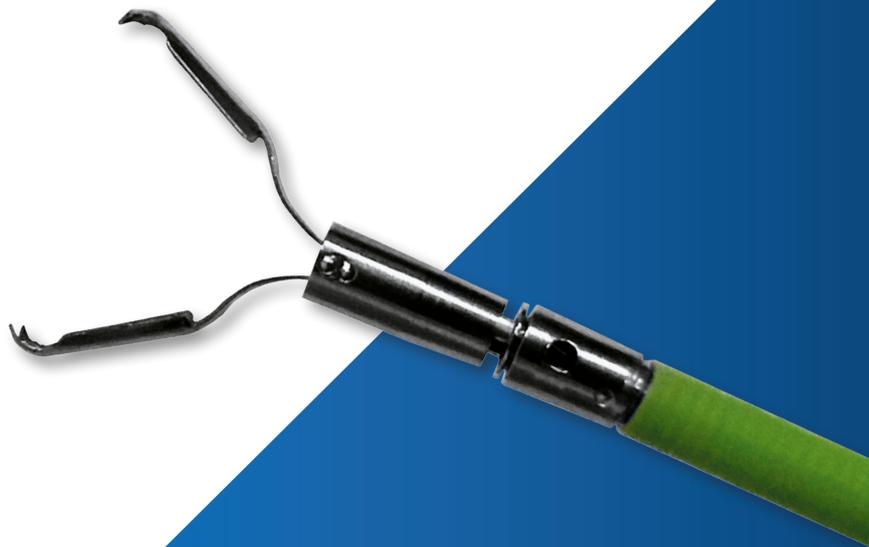


ScopeClip

Hemoclip de un solo uso

ScopeClip - Hemoclip rotativo, reposicionable y extraíble de uso único

Referencia	Abertura del clip (mm)	Ángulo del clip	Ø catéter (mm)	Longitud útil (mm)	Código de color	Cant.
HC-23091355108	9	135°	2,6	2300	Azul oscuro	10
HC-23111355104	11	135°	2,6	2300	Verde	10
HC-231313551018	13	135°	2,6	2300	Violeta	10
HC-231613551044	16	135°	2,6	2300	Azul claro	10

Características

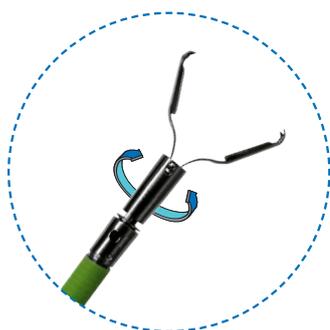

► **Rotativo:** Giro de 360° en ambas direcciones para un mejor ángulo de sujeción ofreciendo una mayor manejabilidad y una colocación exacta.



► **Extremo distal más corto:** para facilitar el paso del clip a través del canal de trabajo cuando el endoscopio está fuertemente apoyado.



► **Reposicionable:** Posibilidad de abrir y cerrar la pinza para una colocación más exacta.



► **Mejor agarre del tejido y mayor fuerza de cierre:** Evitar que el tejido se escape al cerrar la pinza y aumentar el grado de compresión del tejido para un mejor cierre vascular.



► **Extraíble:** Si es necesario (el clip está mal colocado, el clip no se desprende fácilmente de los tejidos pasado un tiempo tras su colocación), es posible volver a abrir el clip y extraerlo con un asa de polipectomía, sin dañar los tejidos.

Asa de extracción de clips hemostáticos ScopeClip

Referencia	Ø Vaina (mm)	Longitud (cm)	Ø Asa (mm)	Forma del asa	Rotativa	Cant.
HPS-2425235075	2,4	230	25	Oval	✓	10

Denominación: Pinza hemostática desechable. **Indicaciones:** Inserción endoscópica de clips para hemostasia o marcación. **Clase:** IIb. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del manual de instrucciones o del etiquetado del dispositivo **Version:** SCL_S_8. Rev.08. Date 17-05-2023

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

