

# ScopeCut

## Sphinctérotome

- ▶ 3 lumières : fil guide - injection - fil de coupe.
- ▶ Diamètre de 2,4 mm effilé à 1,6 mm à son extrémité.
- ▶ Conçu pour techniques sur fil guide court et sur fil guide long.
- ▶ Rotation 1:1 avec indicateur d'orientation (gauche-droite) sur la poignée.
- ▶ Disponible avec fil de coupe nu ou partiellement isolé.
- ▶ Disponible avec fil guide préchargé.




# ScopeCut Sphinctérotome

## ScopeCut - Sphinctérotome 3 lumières, rotatif, Ø 2,4 mm effilé à 1,6 mm, longueur 180 cm

Modèle	Référence	Ø Mini. canal opérateur (mm)	Lg extrémité distale (mm)	Lg fil de coupe (mm)	Isolation fil de coupe	Fil guide (inch)	Guide prémonté	CDT
Aiguille	NP-055099	≥ 2,8	-	Aiguille 5 mm	✗	0.025 / 0.035	✗	5
Standard	LWP-05205096	≥ 2,8	5	20	✓	0.025 / 0.035	✗	5
	LWP-05255096	≥ 2,8	5	25	✓	0.025 / 0.035	✗	5
	LWP-05255096-U	≥ 2,8	5	25	✗	0.025 / 0.035	✗	5
	LWP-05305096	≥ 2,8	5	30	✓	0.025 / 0.035	✗	5
	LWP-05305096-U	≥ 2,8	5	30	✗	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-05205093	≥ 3,7	5	20	✓	0.025 / 0.035	✗	5
Pour fil guide court	SWP-05205093-U	≥ 3,7	5	20	✗	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-05255098	≥ 3,7	5	25	✓	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-05255098-U	≥ 3,7	5	25	✗	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-05305098	≥ 3,7	5	30	✓	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-05305098-U	≥ 3,7	5	30	✗	0.025 / 0.035	✗	5
	SWP-052550910W2526	≥ 3,7	5	25	✓	0.025	✓ GW-25265041	5
Avec fil guide court préchargé	SWP-052550910W3526	≥ 3,7	5	25	✓	0.035	✓ GW-35265041	5
	SWP-053050910W2526	≥ 3,7	5	30	✓	0.025	✓ GW-25265041	5
	SWP-053050910W3526	≥ 3,7	5	30	✓	0.035	✓ GW-35265041	5


## Caractéristiques

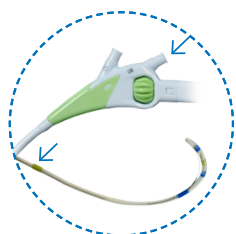


- ▶ Compatible fil guide court et fil guide long de 0.025 et 0.035 inch.




- ▶ 3 lumières :
  - Fil guide
  - Injection
  - Fil de coupe

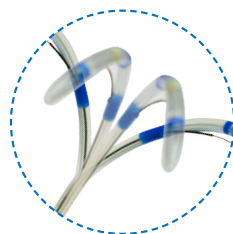


- ▶ Rotation 1 : 1, même lorsque le fil de coupe est sous tension.

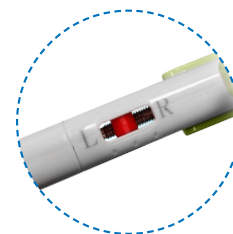

- ▶ Indicateur d'orientation de l'extrémité distale (Gauche - droite).

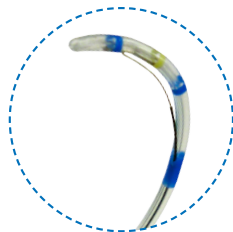

- ▶ Extrémité distale conique pour faciliter la canulation.

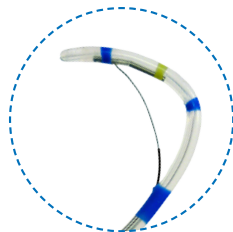

- ▶ Isolation de l'extrémité proximale du fil de coupe pour protéger les tissus environnants et l'extrémité de l'endoscope.



- ▶ Coupe nette de la papille

**Dénomination :** Sphinctérotome ScopeCut. **Indications :** Canulation des voies biliaires et sphinctérotomie trans-endoscopique de la papille de Vater et/ou du sphincter d'Oddi. **Classe :** IIb. **Organisme notifié :** CE0123. **Fabricant :** Hangzhou AGS Medtech Co., Ltd. **Bon usage :** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement :** Produit non inscrit à la LPPR. **Version:** ESF\_F\_4. Rev.04. Date 14-06-2022

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

