


ScopeGrasp




Greifzangen

- ▶ Eine breite Palette für die Extraktion einer Vielzahl von Fremdkörpern unterschiedlicher Form und Konsistenz, sowohl für die Verdauungs- als auch für die Bronchialendoskopie.

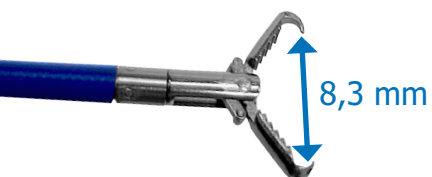

**Verschiedene Formen,
für die Gastrointestinale-
und Bronchialendoskopie.**



ScopeGrasp - Greifzangen							
Kiefer	Referenz	Katheter		Branchenöffnung (mm)	Farbcode	Drehbar	Menge
		Ø (mm)	Länge (cm)				
	PELICAN (Kombination Rattenzahn/Alligator)						
	GF-18125033	1,8	120	8,5	Gelb	✗	10
	GF-18185033	1,8	180	8,5	Gelb	✗	10
	GF-23235033	2,3	230	8,3	Blau	✗	10
	GF-232350310	2,3	230	15,0	Blau	✗	10
GF-23235039	2,3	230	8,3	Blau	✓	5	
	ALLIGATOR						
	GF-23235031	2,3	230	8,7	Blau	✗	10
	RATTENZÄHNE						
	GF-18075032	1,8	70	4,6	Gelb	✗	10
	GF-18165032	1,8	160	4,6	Gelb	✗	10
GF-18235032	1,8	230	4,6	Gelb	✗	10	

Merkmale

- ▶ **Steril und zum einmaligen Gebrauch:** reduziert das Risiko nosokomialer Infektionen, einsatzbereit für Notfallextraktionen und immer funktionsfähig.
- ▶ **Diabolo-Griff** für einen sicheren Griff und kontrollierte Bewegung.
- ▶ **Farbcodierung** zur schnellen Erkennung des Scheibendurchmessers.
- ▶ **Pantograph-Öffnungsmechanismus** für die Extraktion auch bei abgewinkelten Endoskopen.
- ▶ **Drei Modelle verfügbar**, für die Extraktion einer Vielzahl von Fremdkörpern unterschiedlicher Form und Konsistenz.
- ▶ **Drehbares Modell**, um die Positionierung der Zange auf dem zu extrahierenden Fremdkörper zu erleichtern.

Beschreibung: ScopeGrasp Fremdkörperpinzette. **Indikationen:** Endoskopische Fremdkörperextraktion. Klasse: IIa. Benannte Stelle: CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** GF_G_2. Rev. 02. Datum: 19-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

