

# ScopeProtect

## Protège-Embout Universel Pour Endoscopes

### Disques en silicone souple

Garantie que l'extrémité distale de l'endoscope reste correctement en place dans le dispositif quel que soit son diamètre.



### Piliers amortisseurs de chocs

Protection contre les impacts accidentels lors des manipulations et du transport

### Universel

S'adapte à tous les endoscopes d'un diamètre compris entre 2,5 et 14 mm

Dispositif breveté



**Un seul dispositif pour protéger l'extrémité distale de la majorité de vos endoscopes, de 2,5 à 14 mm de diamètre, sans compromettre leur séchage.**

## ScopeProtect

### Protège-embout universel pour endoscopes à usage unique

L'extrémité distale des endoscopes se compose d'éléments qui peuvent s'endommager facilement en cas de chocs lors du transport et du stockage, engendrant ainsi des réparations très coûteuses. Qui plus est, des micro-rayures, des éraflures peuvent abriter du sang, des tissus et des bactéries, ce qui présente un risque de contamination croisée entre patients.


**ScopeProtect** apporte une solution à ces problématiques, car il permet de protéger l'extrémité distale d'une large variété d'endoscopes souples (gastrosopes, coloscopes, duodénoscopes, écho-endoscopes, bronchoscopes, cystoscopes, urétéroscopes) tout en permettant l'évacuation d'humidité résiduelle et donc le séchage de l'endoscope.

**ScopeProtect** protège l'extrémité de l'endoscope lors de :

- ▶ Son transfert du LDE vers une armoire séchante ou un autre dispositif de stockage
- ▶ Sa mise en place et de son retrait d'une armoire séchante
- ▶ Son transfert d'une armoire séchante ou un autre dispositif de stockage vers le système de transport

### ScopeProtect - Protège-embout universel pour endoscopes à usage unique

NON STERILE

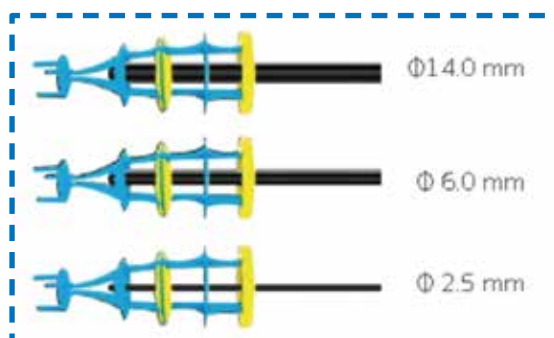

Référence	Désignation	Longueur	Largeur	CDT
ENDO107	Protège-embout universel pour endoscopes	79 mm	27 mm	50

## Caractéristiques

- ▶ **Universel** : Le dispositif **ScopeProtect** est compatible avec tous les endoscopes d'un diamètre externe de 2,5 à 14 mm (gastrosopes, coloscopes, duodénoscopes, écho-endoscopes, bronchoscopes, cystoscopes, urétéroscopes).
- ▶ **Usage unique** pour un produit toujours efficace et une diminution significative des risques d'infections nosocomiales.
- ▶ **Traçabilité** : 3 étiquettes détachables autocollantes accompagnent chaque dispositif.

Dénomination : Protection extrémité terminal endoscope, ScopeProtect. Indications : Mise en place pour protéger l'extrémité distale de l'endoscope pendant le transport et le stockage. Classe : I non stérile Organisme notifié : Certificat de conformité CE. Fabricant : GA Health Company Limited. Bon usage : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. Remboursement : Produit non inscrit à la LPPR. Version: SP\_F\_1. Rev.01 Date 25-11-21

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : [info.fr@creomedical.com](mailto:info.fr@creomedical.com)

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46



SP\_F\_1