

ScopeProtect

Universeller Endoskopspitzenschutz

Weiche Silikonscheiben

Sorgen dafür, dass das distale Ende des Endoskops unabhängig von seinem Durchmesser korrekt in der Vorrichtung sitzt



Stoßdämpfende Säulen

Schutz gegen unbeabsichtigte Stöße während der Handhabung und dem Transport

Universal

Passend für alle Endoskope mit einem Durchmesser zwischen 2,5 und 14 mm

Patentiertes Gerät



Eine Vorrichtung zum Schutz des distalen Endes der meisten Ihrer Endoskope, mit einem Durchmesser von 2,5 bis 14 mm, ohne deren Trocknung zu beeinträchtigen.

ScopeProtect

Universelle Einweg-Spitzenabdeckung für Endoskope

Das distale Ende von Endoskopen besteht aus Komponenten, die durch Stöße während des Transports und der Lagerung leicht beschädigt werden können, was zu kostspieligen Reparaturen führt. Darüber hinaus können sich in Mikrobeschädigungen Blut, Gewebe und Bakterien ansammeln, was ein Risiko für die Kreuzkontamination zwischen Patienten darstellt.


ScopeProtect bietet eine Lösung für diese Probleme, da es das distale Ende einer Vielzahl flexibler Endoskope (Gastroskope, Kolonoskope, Duodenoskope, Echo-Endoskope, Bronchoskope, Zystoskope, Ureteroskope) schützt und gleichzeitig die Evakuierung von Restfeuchtigkeit und damit die Trocknung des Endoskops ermöglicht.

ScopeProtect schützt die Endoskopspitze, bei :

- ▶ Überführung aus dem RDG-E (Reinigungs- und Desinfektionsgeräte) in einen Trockenschrank oder eine andere Lagereinrichtung
- ▶ Einlagerung und Entnahme aus einem Trockenschrank
- ▶ Übergabe aus einem Trockenschrank oder einer anderen Lagereinrichtung an das Transportsystem

ScopeProtect - Universelle Einweg-Spitzenabdeckung für Endoskope

NON STERILE

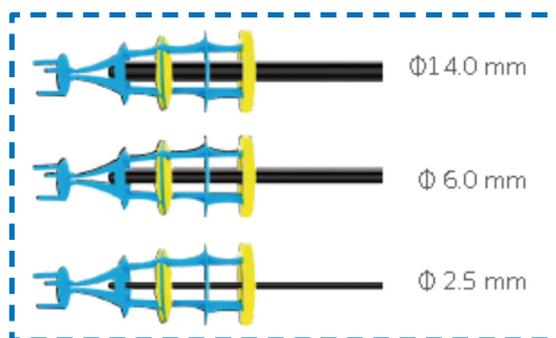

Referenz	Beschreibung	Länge	Breite	Menge
ENDO107	Universeller Endoskopspitzenschutz	79 mm	27 mm	50

Merkmale

- ▶ **Universell:** Das ScopeProtect-Gerät ist mit allen Endoskopen mit einem Außendurchmesser von 2,5 bis 14 mm kompatibel (Gastroskope, Kolonoskope, Duodenoskope, Echo-Endoskope, Bronchoskope, Zystoskope, Ureteroskope).
- ▶ **Einmalige Anwendung** für ein gleichbleibend wirksames Produkt und eine deutliche Reduzierung des Risikos nosokomialer Infektionen.
- ▶ **Rückverfolgbarkeit:** 3 abnehmbare selbstklebende Etiketten mit jedem Gerät.

Beschreibung: Endoskop-Endschutz, ScopeProtect. **Indikationen:** Zum Schutz des distalen Endes des Endoskops während des Transports und der Lagerung. **Klasse:** I unsteril **Benannte Stelle:** CE-Zertifikat der Konformität. **Hersteller:** GA Health Company Limited. **Richtige Anwendung:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Geräteetikett. **Version:** SP_G_1. Rev.01 Datum 20-10-22

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

