

ScopeSnare

Anses à polypectomie

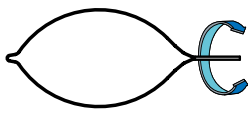

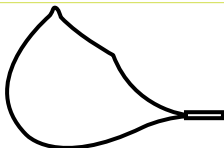
- ▶ **2 modèles** : Standard et « Anti-Glisse »
- ▶ **4 tailles** : 10, 15, 25 et 32 mm
- ▶ **Rotatives**
- ▶ **Différents diamètres de fil de coupe** pour s'adapter au mode de résection.



ScopeSnare

Anses à polypectomie

ScopeSnare - Anse à polypectomie

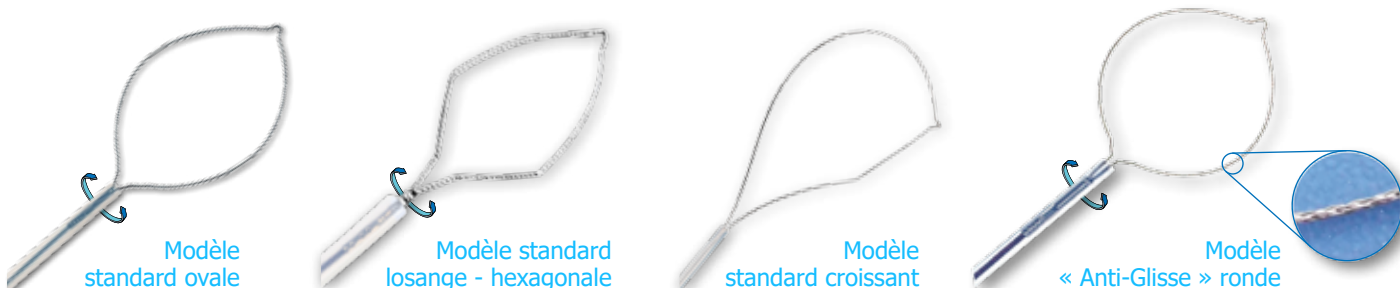
	Référence	Ø cathéter (mm)	Longueur (cm)	Ø anse (mm)	Ø fil de coupe (mm)	Forme anse	Rotative	CDT
	HPS-2410235075	2,4	230	10	0,30	Ovale	✓	10
	HPS-2415235075	2,4	230	15	0,30	Ovale	✓	10
	HPS-2425235075	2,4	230	25	0,41	Ovale	✓	10
	HPS-2432235075	2,4	230	32	0,41	Ovale	✓	10
	HPS-2410235076	2,4	230	10	0,30	Losange - Hexagonale	✓	10
	HPS-2415235076	2,4	230	15	0,30	Losange - Hexagonale	✓	10
	HPS-2425235076	2,4	230	25	0,41	Losange - Hexagonale	✓	10
	HPS-2415235079	2,4	230	15	0,30	Croissant	✗	10
	HPS-2425235079	2,4	230	25	0,30	Croissant	✗	10

ScopeSnare - Anse à polypectomie « Anti-Glisse »

	Référence	Ø cathéter (mm)	Longueur (cm)	Ø anse (mm)	Ø fil de coupe (mm)	Forme anse	Rotative	CDT
	HPS-2415235078	2,4	230	15	0,43	Ronde	✓	10
	HPS-2425235078	2,4	230	25	0,43	Ronde	✓	10

Caractéristiques

- ▶ **Rotatives**, pour faciliter le positionnement de l'anse sur la lésion à réséquer.
- ▶ **Modèle standard** : diamètre du fil de coupe adapté à la taille de l'anse pour une section nette.
 - 10 et 15 mm : multibrin tressé de **0,30 mm**.
 - 25 et 32 mm : multibrin tressé de **0,41 mm**.
- ▶ **Modèle « Anti-Glisse »** : tressage spécifique des brins de l'anse destiné à augmenter son adhérence sur la muqueuse et réduire l'effet « glissement » lors de sa fermeture.



Dénomination : Anse à polypectomie ScopeSnare. **Indications** : Résection, par voie endoscopique, de petits polypes, de polypes sessiles, de polypes pédiculés et de tissus dans le tractus gastrointestinal. **Classe** : IIb. **Organisme notifié** : CE0123. **Fabricant** : Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : SS_F_6. Rev.06. Date 06-09-22

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

