

# ScopeSnare

## Polypektomieschlingen

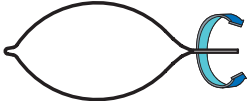

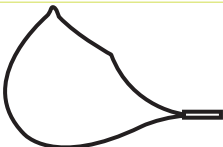
- ▶ **2 Typen: Standard und Anti-Rutsch**
- ▶ **4 Größen: 10, 15, 25 und 32 mm.**
- ▶ Rotierbar
- ▶ **Verschiedene Schneidedrahtdurchmesser** je nach Resektionsart




# ScopeSnare

## Polypektomieschlingen

### ScopeSnare - Polypektomieschlinge, oval, drehbar

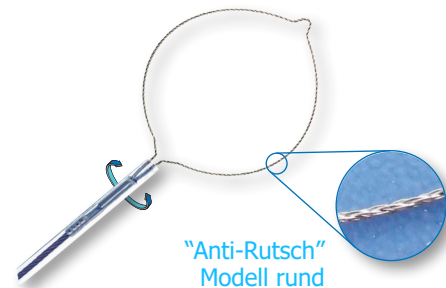
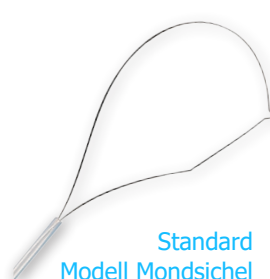
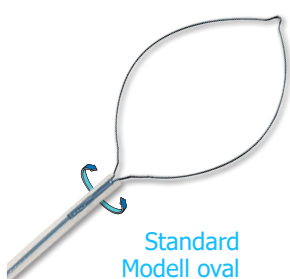
	Referenz	Katheter Ø (mm)	Länge (cm)	Schäkel Ø (mm)	Ø Schneidedraht (mm)	Form des Griffs	Rotierbar	Menge
	HPS-2410235075	2,4	230	10	0,30	Oval	✓	10
	HPS-2415235075	2,4	230	15	0,30	Oval	✓	10
	HPS-2425235075	2,4	230	25	0,41	Oval	✓	10
	HPS-2432235075	2,4	230	32	0,41	Oval	✓	10
	HPS-2410235076	2,4	230	10	0,30	Rhombus - Hexagon	✓	10
	HPS-2415235076	2,4	230	15	0,30	Rhombus - Hexagon	✓	10
	HPS-2415235079	2,4	230	15	0,30	Mondsichel	✗	10
	HPS-2425235079	2,4	230	25	0,30	Mondsichel	✗	10

### ScopeSnare - Anti-Rutsch-Polypektomieschlinge, oval, drehbar

	Referenz	Katheter Ø (mm)	Länge (cm)	Schäkel Ø (mm)	Ø Schneidedraht (mm)	Form des Griffs	Rotierbar	Menge
	HPS-2415235078	2,4	230	15	0,43	Rund	✓	10
	HPS-2425235078	2,4	230	25	0,43	Rund	✓	10

## Merkmale

- ▶ **Drehbar**, um die Positionierung der Schlinge auf der zu entfernenden Läsion zu erleichtern.
- ▶ **Standardtyp**: Schnittdrahtdurchmesser angepasst an die Größe der Schlinge für einen sauberen Abschnitt.
  - **10 und 15 mm**: geflochtener Draht von **0,30 mm**
  - **25 und 32 mm**: geflochtener Draht von **0,41 mm**
- ▶ **Anti-Rutsch-Typ**: Einzigartiges geflochtenes Design der Schlinge zur Erhöhung der Reibung auf der Schleimhaut und zur Verhinderung des Verrutschens beim Einfangen der Läsion.



**Bezeichnung:** Polypektomie-Griff. **Indikationen:** Endoskopische Resektion von kleinen Polypen, sessilen Polypen, gestielten Polypen und Gewebe im Gastrointestinaltrakt. **Klasse:** IIb. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SS\_G\_3. Rev.03. Datum: 19-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

## Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

