

# ScopeSnare

## Asas de polipectomía

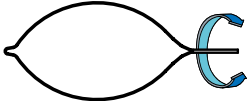
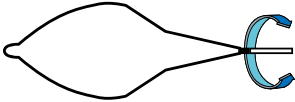
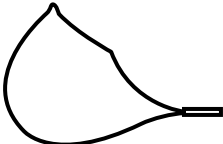
- ▶ 2 modelos: **Estándar** y **"Antideslizante"**
- ▶ 4 tamaños: 10, 15, 25 y 32 mm
- ▶ Rotativas
- ▶ **Diferentes diámetros de filamentos** para adaptarse a los distintos métodos de resección




# ScopeSnare

## Asas de polipsectomía

### ScopeSnare - Asa de polipsectomía

	Referencia	Ø catéter (mm)	Longitud (cm)	Ø asa (mm)	Ø filamento de corte (mm)	Forma del asa	Rotativa	Cant.
	HPS-2410235075	2,4	230	10	0,30	Oval	✓	10
	HPS-2415235075	2,4	230	15	0,30	Oval	✓	10
	HPS-2425235075	2,4	230	25	0,41	Oval	✓	10
	HPS-2432235075	2,4	230	32	0,41	Oval	✓	10
	HPS-2410235076	2,4	230	10	0,30	Simétrica creciente - Hexagonal	✓	10
	HPS-2415235076	2,4	230	15	0,30	Simétrica creciente - Hexagonal	✓	10
	HPS-2415235079	2,4	230	15	0,30	Asimétrica	✗	10
	HPS-2425235079	2,4	230	25	0,30	Asimétrica	✗	10

### ScopeSnare - Asa de polipsectomía « Antideslizante »

	Referencia	Ø catéter (mm)	Longitud (cm)	Ø asa (mm)	Ø filamento de corte (mm)	Forma del asa	Rotativa	Cant.
	HPS-2415235078	2,4	230	15	0,43	Redonda	✓	10
	HPS-2425235078	2,4	230	25	0,43	Redonda	✓	10

## Características

- ▶ **Rotativo**, para facilitar el posicionamiento del asa en la lesión a tratar.
- ▶ **Modelo estándar**: diámetro del alambre de corte adaptado al tamaño del asa para una corte limpio
  - 10 y 15 mm: alambre trenzado multi-filamento de **0,30 mm**.
  - 25 y 32 mm: alambre trenzado multi-filamento de **0,41 mm**.
- ▶ **Modelo "antideslizante"**: Trenzado específico de las hebras del asa para aumentar su adherencia a la membrana mucosa y reducir el efecto "deslizante" al cerrarla.



**Denominación:** Asa de polipsectomía. **Indicaciones:** Resección endoscópica de pólipos pequeños, pólipos sésiles, pólipos pediculados y tejido en el tracto gastrointestinal. **Clase:** IIb. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del folleto de instrucciones o del etiquetado del dispositivo. **Versión:** SS\_S\_5. Rev.05. Date 06-09-22.

Distribuido en España por:

**Creo Medical S.L.**

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

