


ScopeTrap Plus

Piège à polype à compartiments amovibles

Conçu pour sécuriser
la récupération et le
transfert des polypes
réséqués

Systeme à double filtre pour
éviter la perte de polypes pendant
l'aspiration et éventuellement
collecter un 5^{ème} polype

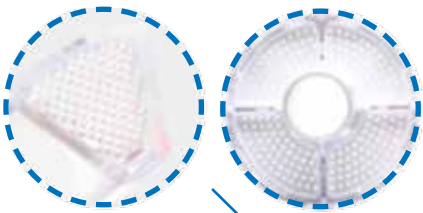

Couvercle
transparent pour
visualiser le contenu
des compartiments

Fermeture
sécurisée et
ouverture facile
par alignement
des marqueurs
verts

Numéros des
compartiments
facilement identifiables

Compartiments amovibles dans lesquels
les polypes peuvent directement transférés
dans le pot d'anapath



ScopeTrap Plus

Piège à polypes à compartiments amovibles

Grace à son système de double filtre intégré et à ses compartiments amovibles, ce nouveau piège à polypes, qui vient compléter notre gamme, vous apportera encore plus de sécurité et de confort d'utilisation.

Le piège à polype **ScopeTrap Plus** se compose :

- ▶ D'un réceptacle rond muni d'un filtre, dans lequel se trouvent,
- ▶ 4 compartiments amovibles (marqués de "1" à "4") destinés à recevoir les polypes réséqués chronologiquement, séparés les uns des autres par 4 espaces ouverts.
- ▶ D'un couvercle muni d'1 tubulure pour le raccordement à l'endoscope et d'un port pour le raccordement à l'aspiration centrale.

ScopeTrap Plus- Piège à polypes à compartiments amovibles

NON STERILE



Référence	Désignation	CDT
ENDO082	Piège à polype à compartiments (4) amovibles	12

Caractéristiques

- ▶ **Capture de polypes en système clos**, pour protéger le personnel hospitalier d'une exposition potentielle à des biomatériaux.
- ▶ **Compartiments numérotés**, pour conserver la chronologie des polypes réséqués.
- ▶ **Compartiments amovibles**, pour réduire les manipulations liées au transfert des polypes du piège au pot d'anapath.
- ▶ **Système à double filtre** pour éviter la perte de polypes pendant l'aspiration et éventuellement collecter un 5^{ème} polype.
- ▶ **Usage unique** pour un produit toujours efficace et une diminution significative des risques d'infections nosocomiales.
- ▶ **Traçabilité** : 3 étiquettes détachables autocollantes accompagnent chaque dispositif.

Dénomination : Piège à polype, ScopeTrap Plus. **Indications** : Mise en place pour l'aspiration et le transport des polypes retirés par endoscopie en vue d'un examen histologique. **Classe** : I non stérile
Organisme notifié : Certificat de conformité CE. **Fabricant** : GA Health Company Limited. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : STRAP_F_1. Rev.01 Date 07-12-21

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

