


# ScopeTrap Plus

## Polypenfalle mit herausnehmbaren Kammern

Entwickelt zur  
Sicherung der  
Bergung und  
Überführung von  
resezierten Polypen

Doppeltes Filtersystem, um den  
Verlust von Polypen während  
der Aspiration zu vermeiden und  
möglicherweise einen 5<sup>ten</sup> Polypen  
zu sammeln

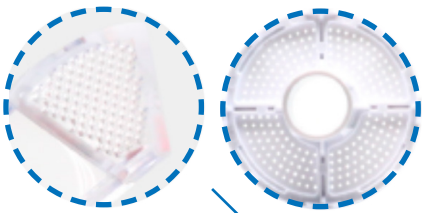

Transparenter  
Deckel für den  
Einblick in den Inhalt  
der Fächer

Sicherer Verschluss  
und einfaches  
Öffnen durch  
Ausrichten  
der grünen  
Markierungen

Leicht identifizierbare  
Fachnummern

Herausnehmbare Kammern,  
wodurch Polypen direkt in den  
Histologietopf übertragen werden  
können



## ScopeTrap Plus

### Polypenfalle mit herausnehmbaren Kammern

Mit ihrem integrierten Doppelfiltersystem und den herausnehmbaren Kammern bietet Ihnen diese neue Polypenfalle, die unser Sortiment vervollständigt, noch mehr Sicherheit und Komfort.

Die Polypenfalle **ScopeTrap Plus** besteht aus:

- ▶ Einem runden Gefäß mit einem Filter,
- ▶ 4 herausnehmbaren Kammern (gekennzeichnet von "1" bis "4") zur chronologischen Aufnahme der resezierten Polypen, die durch 4 offene Zwischenräume voneinander getrennt sind.
- ▶ Ein Deckel mit einem Schlauch für den Anschluss an das Endoskop und einem Port für den Anschluss an die zentrale Absaugung.

### ScopeTrap Plus- Polypenfalle mit herausnehmbaren Kammern

NON STERILE



Referenz	Beschreibung	Menge
ENDO082	Polyp trap with four removable chambers	12

### Merkmale

- ▶ **Geschlossenes System zur Polypenerfassung**, um das Krankenhauspersonal vor einer möglichen Exposition gegenüber Biomaterial zu vereinfachen.
- ▶ **Nummerierte Kammern**, um die Chronologie der resezierten Polypen zu erhalten.
- ▶ **Herausnehmbare Kammern**, um die Handhabung bei der Überführung der Polypen von der Falle in die Anapath-Kammer zu reduzieren.
- ▶ **Doppeltes Filtersystem**, um den Verlust von Polypen während der Aspiration zu vermeiden und nicht fälschlicherweise einen 5. Polypen einzusammeln
- ▶ **Einmalige Anwendung** für ein gleichbleibend wirksames Produkt und eine deutliche Reduzierung des Risikos nosokomialer Infektionen.
- ▶ **Rückverfolgbarkeit**: 3 abnehmbare selbstklebende Etiketten mit jedem Gerät.

**Bezeichnung:** Polypenfalle, ScopeTrap. **Indikationen:** Zur Absaugung und zum Transport von endoskopisch entfernten Polypen zur histologischen Untersuchung. **Klasse:** I unsteril **Benannte Stelle:** CE Konformitätsbescheinigung. **Hersteller:** GA Health Company Limited. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** STRAP\_G\_2. Rev.02 Datum 19-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

#### Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.



# ScopeTrap

## Polypenfalle

**Essentielles Zubehör  
für alle Polypektomie-  
Untersuchungen**

Schlauch mit  
Doppelkonus für  
die Verbindung zur  
Saugpumpe

Schlauch zur  
Verbindung mit  
dem Endoskop

Fluoreszierende  
Markierung der  
Fächer


Fächer für  
resezierte  
Polypen

## ScopeTrap Polypenfalle

Garantierter Komfort und Sicherheit für Mitarbeiter durch die ermöglichte Filterung, Unterteilung und Lagerung der resezierten Polypen. **ScopeTrap** ist ein essentielles Hilfsmittel für die Polypektomie.

**ScopeTrap** besteht aus:

- ▶ Einem runden Behälter unterteilt in 8 Fächer: 4 (markiert von 1 bis 4), um die resezierten Polypen in chronologischer Reihenfolge zu erhalten und 4 (markiert mit 0) für die Absaugung.
- ▶ Ein Deckel enthält zwei Schläuche: der zentrale Schlauch wird an der Saugpumpe angeschlossen und der dezentrale Schlauch am Endoskop.

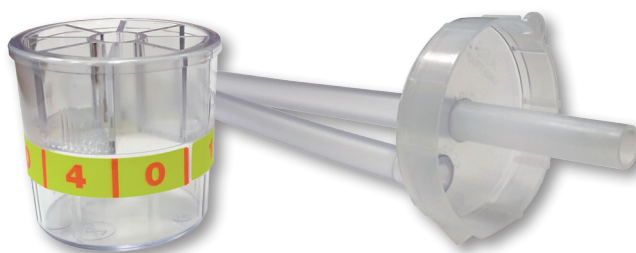

Referenz	Beschreibung	Menge
10017130	<b>ScopeTrap</b> : Polyp Trap – box of 50 units	50
10017130B	<b>ScopeTrap</b> : Polyp Trap – box of 20 units	20

*Eine Polypenfalle mit entfernbaren Fächern ist zusätzlich verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns*

## Merkmale



- ▶ **Fängt geborgene Polypen in einem geschlossenen System**, um die Unversehrtheit der Proben zu gewährleisten.



- ▶ **Polypenfalle mit 4 nummerierten Fächern**, um die chronologische Reihenfolge der resezierten Polypen zu sichern.



- ▶ **Fluoreszierende Markierung der Fächer**, um die einfache Identifikation selbst bei schwachem Licht im Behandlungsraum sicher zu stellen.



- ▶ **Rückverfolgbarkeit**: 2 selbstklebende Etiketten sind bei jeder Polypenfalle dabei.

**Beschreibung:** Polypenfalle ScopeTrap. **Indikationen:** Filtern, Trennen und Sammeln von resezierten Polypen durch Endoskopie. **Klasse:** I. **Zertifizierte Stelle:** Auto-Zertifizierung. **Hersteller:** Creo Medical S.L. **Verwendung:** Lesen Sie vor der Verwendung aufmerksam die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung oder auf dem Produktetikett. **Version:** TRAP\_G\_4. Rev.04. Datum: 19-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

### Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: [info.de@creomedical.com](mailto:info.de@creomedical.com)

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.



# ScopeTrap

Polypenfalle mit  
herausnehmbaren Kammern

**Schubladenverriegelung**  
für mehr Sicherheit und  
einfache Handhabung.



## ScopeTrap

### Polypenfalle mit herausnehmbaren Kammern

Sie vervollständigen unser Angebot im Bereich der Polypenentfernung und erfüllen die Bedürfnisse der meisten Anwender, wobei sie stets Effizienz, Komfort und Sicherheit für das Pflegepersonal garantieren.

NON STERILE



ENDO040

Geöffnete Kammer, um die Probe zu entnehmen



Geschlossener Zustand



Wirksames Schließsystem der Kammern

Referenz	Bezeichnung	Menge
ENDO040	Polypenfalle mit 2 herausnehmbaren Einwegkammern	20

## Merkmale

- ▶ **Ausgestattet mit 2 abnehmbaren Kammern mit Filter**, die die Bergung mehrerer Polypen im Tandem ohne Unterbrechung des Absaugvorgangs ermöglichen.
- ▶ **Geschlossenes System zur Erfassung von Polypen** zum Schutz des Krankenhauspersonals vor einer möglichen Exposition gegenüber Keimen.
- ▶ **Eingebautes Verschlusssystem für abnehmbare Kammern** bietet erhöhte Sicherheit und einfache Handhabung beim Einsetzen und Entfernen.
- ▶ **Rückverfolgbarkeit:** 3 abnehmbare selbstklebende Etiketten mit jedem Gerät.

**Bezeichnung:** Thomas Trap Polypenfalle mit herausnehmbaren Kammern. **Indikationen:** Absaugung von endoskopisch resezierten Polypen. **Klasse:** I unsteril. **Benannte Stelle:** Selbst-zertifiziert. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Packungsbeilage oder der Gerätebeschriftung sorgfältig durch. **Version :** TT\_G\_3. Rev.03 Datum 13-06-23

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

**Creo Medical GmbH**

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: [info.de@creomedical.com](mailto:info.de@creomedical.com)

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

