

# ScopeXtract

## Ballon d'Extraction Biliaire Triple Lumière


**Conçu pour  
l'extraction de calculs  
dans les voies biliaires  
ou pour faciliter  
l'injection de produit  
de contraste.**



# ScopeXtract


## Ballon d'Extraction Biliaire

### ScopeXtract - Ballon d'extraction

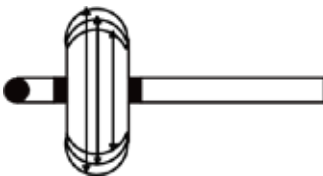	Référence	Ø Cathéter (Fr / mm)	Longueur (cm)	Ø du ballonnet gonflé (mm)	Compatible fil guide court	CDT
	SEB-1012155451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✗	5
	SEB-1315185451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✗	5
	SEB-1012155453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✓	5
	SEB-1315185453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✓	5

## Caractéristiques

- ▶ **3 lumières** : fil-guide – injection – gonflage du ballonnet.
- ▶ **1 ballonnet = 3 diamètres**
- ▶ Disponible en **modèle standard** ou en **modèle pour fil guide court**.
- ▶ La **forme platoïde du ballon** permet de réduire la surface en contact avec les parois du canal biliaire, de manière :
  - à réduire la friction et donc la résistance au retrait,
  - de retirer la majeure partie des calculs en un seul passage.
- ▶ Le **ballonnet ne se déforme pas facilement**, ce qui permet d'éviter les fuites latérales lors de l'extraction.
- ▶ La **conception conique de l'extrémité du cathéter** permet de faciliter la canulation de la papille.

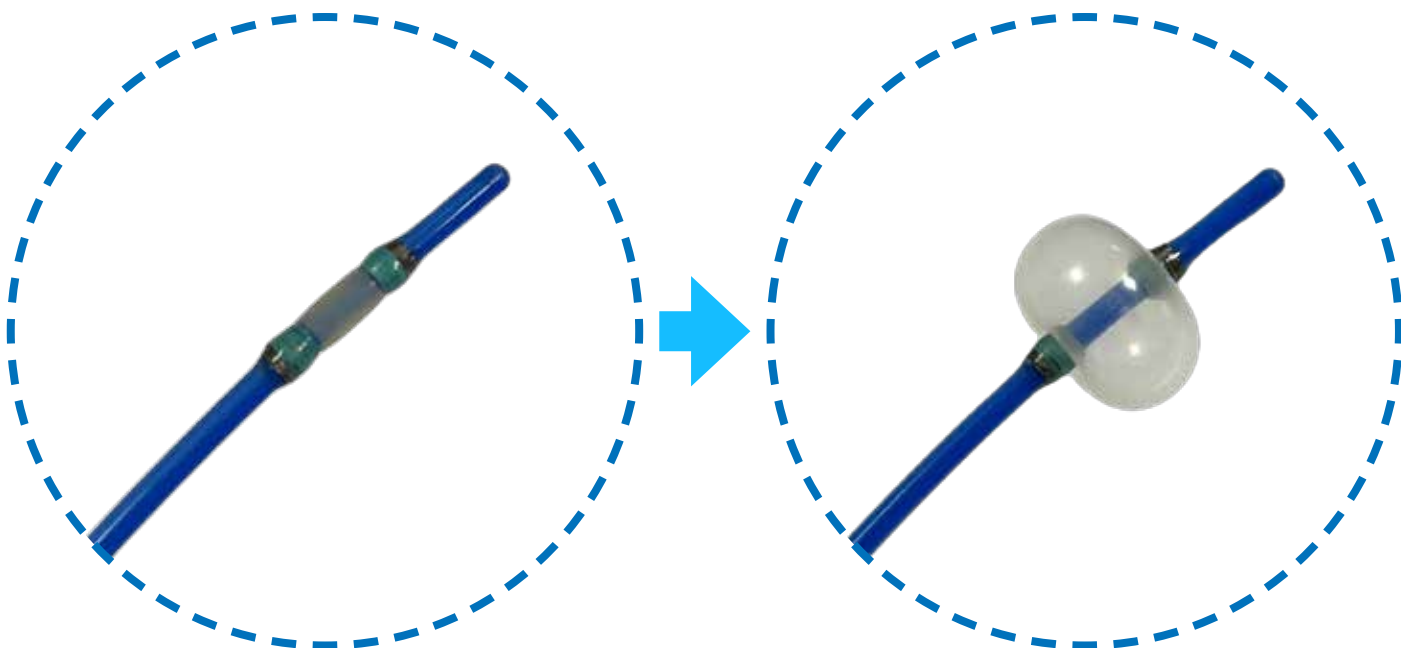

**Dénomination** : Ballon d'extraction ScopeXtract. **Indications** : Retrait endoscopique de calculs biliaires. **Classe** : IIa. **Organisme notifié** : CE0123. **Fabricant** : Hangzhou AGS Medtech Co., Ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : SX\_F\_2. Rev.02. Date 22-09-22

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

