

ScopeXtract

Balón de Extracción Biliar de Triple Lumen


**Diseñada para
eliminar cálculos del
conducto biliar o para
facilitar la inyección de
medios de contraste.**



ScopeXtract


Balón de Extracción Biliar

ScopeXtract - Balón de extracción

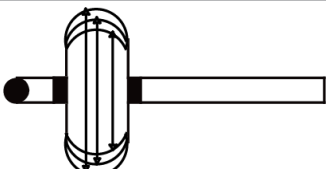	Referencia	Ø Catéter (Fr / mm)	Longitud (cm)	Ø del balón inflado (mm)	Compatible con guía corta	Cant.
	SEB-1012155451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✗	5
	SEB-1315185451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✗	5
	SEB-1012155453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✓	5
	SEB-1315185453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✓	5

Características

- ▶ **3 lumenes:** guía - inyección - llenado del balón
- ▶ **1 balón = 3 diámetros**
- ▶ Disponible en modelo **estándar** o de **guía corta**.
- ▶ La **forma platóide del balón** reduce el área en contacto con las paredes del conducto biliar, de manera que:
 - reduce la fricción y, por tanto, la resistencia a la retracción
 - elimina la mayoría de las piedras en una sola pasada
- ▶ El balón **no se deforma fácilmente**, evitando así las fugas laterales durante la extracción.
- ▶ El **diseño cónico de la punta del catéter** permite una fácil canulación de la papila.

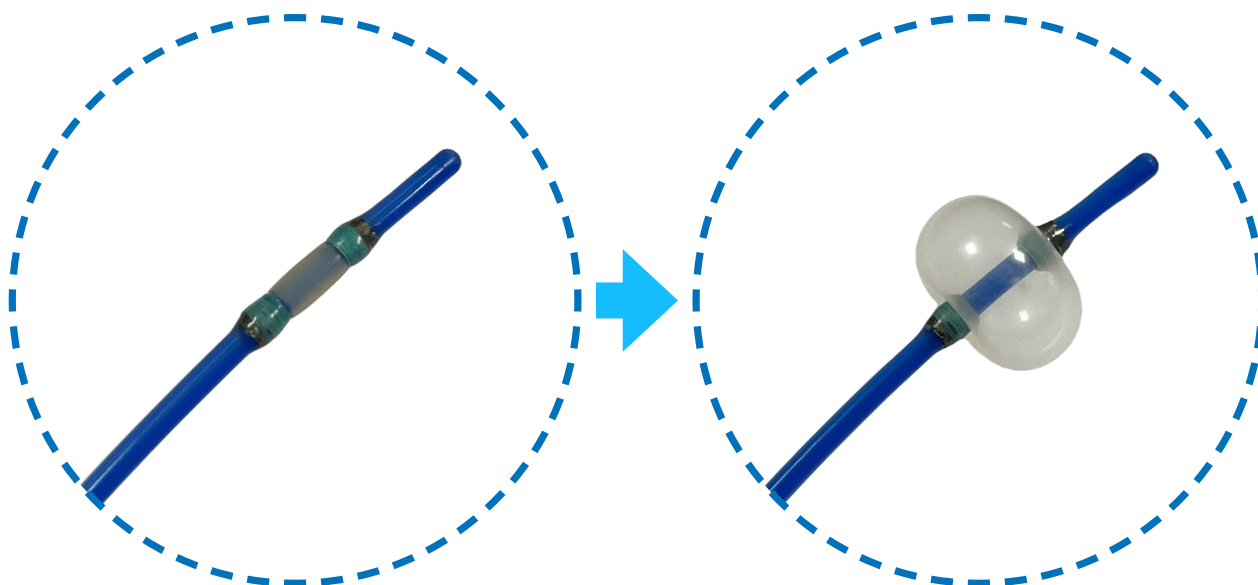

Descripción: Balón de extracción ScopeXtract. **Indicaciones:** Eliminación endoscópica de cálculos biliares. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o de la etiqueta del dispositivo. **Version:** SX_S_2, Rev.02. Date 15-11-2022

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

