

Uroflow-Toilette

Die hygienische Uroflow-Messung für Kinder und Erwachsene



Uroflow
Uroflow-EMG
Biofeedback

Die automatische Uroflow-Toilette

Einfache Diagnostik in 4 Schritten:

- 1** Der Patient liest den Barcode ein und startet die Miktion
- 2** Die Uroflow-Toilette misst die Uroflow-Parameter, erstellt nach Abschluß der Messung den Bericht und sendet ihn an das Krankenhaus-Information-System (KIS)
- 3** Sobald der Uroflow beendet ist und der Patient sich die Hände wäscht, reinigt sich die Uroflow-Toilette automatisch
- 4** Der Patient kann danach direkt zum Arzt oder in den Wartebereich zurück gehen und die Uroflow-Toilette ist innerhalb der nächsten Minute wieder einsatzbereit.



Vollautomatische Funktion

Der Patient vollführt den Uroflow privat, diskret und natürlich und nur in Ausnahmefällen unter Zuhilfenahme des Klinik-Personals

Höchster Hygiene-Komfort

Die Uroflow-Toilette erzeugt eine hygienische und entspannte Atmosphäre und stoppt Geruchs- und Schmutzbildung im Ansatz

Internet of Things Technology

Die Uroflow-Toilette ist für die Fernwartung konzipiert. Damit können wir online Service leisten und jährliche Wartungen und Upgrades durchführen

Als Toilette
oder auch
als Urinal
erhältlich



Interner Bildschirm


Der Bildschirm begleitet den Patienten optisch durch die einzelnen Uroflow-Phasen und zeigt die Messkurven

Barcode Scanner

Der Patient generiert mittels eines internen Barcode seinen individuellen Bericht für das Klinik-Information-System

Online Drucker

Der Patient kann die Messergebnisse innerhalb von Sekunden eigenständig ohne Personaleinsatz entnehmen

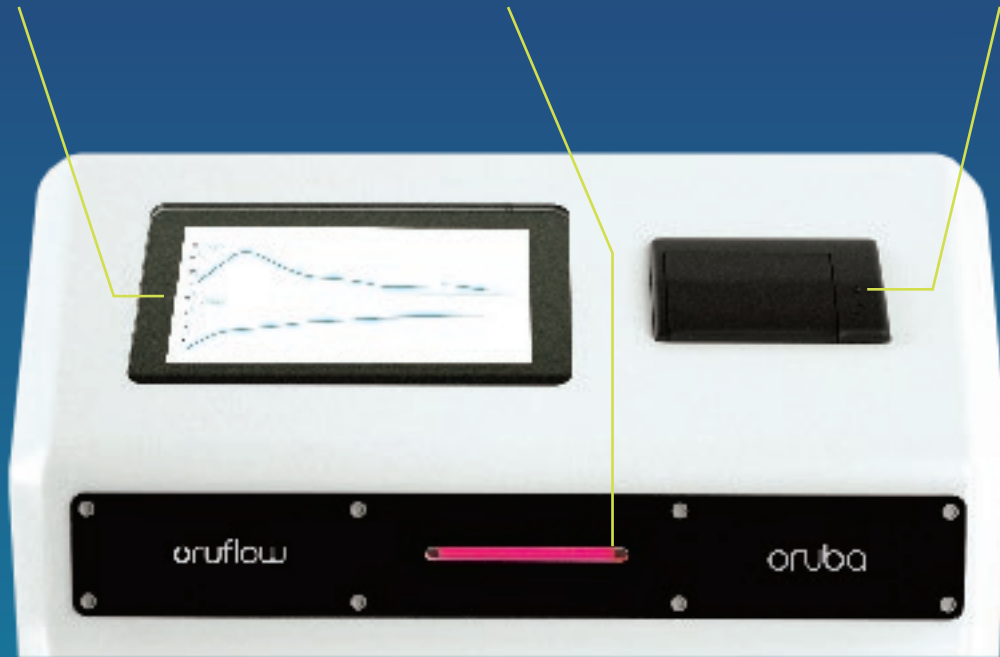

Die Uroflow-Toilette auf einen Blick:

- Automatische, bedienerlose Funktion

- Selbstreinigende Technologie

- Teilweise/Vollständige IT-Integration

- Interne Bildschirm-Führung des Patienten

- Automatische Patientenregistrierung

- Optionaler interner Drucker

- Simultaner Fernwartungszugang

- Hochsensibler Gewichtsmeßwertgeber

- Kabel oder Kabelloser Betrieb

- Flowraten 0 - 100 ml/Sek. *

- Flowvolumen 0 - 1500 ml *

- * Messgenauigkeit +/- 1 %

Uroflow-Toilette

Die hygienische Uroflow-Messung für Kinder und Erwachsene



EMG-Modul

- ▶ EMG-Signalabtastung vor, während und nach der Miktion
- ▶ Synchrone Darstellung der EMG-Signale zur Flowrate und zum Flowvolumen
- ▶ EMG-Vorverstärker
 - Kabellos
 - Wiederaufladbar
 - Tragbar




Biofeedback Modul

- ▶ Zusatzsoftware für EMG-Modul
- ▶ Kinder-gerechte Vogel-Animation
- ▶ Optional: Virtual-Reality-Brille (VR)

	Uroflow-Toilette (UT)	UT-PRO	UT-EMG	UT-EMG-PRO
Uroflow	✓	✓	✓	✓
KIS-Integration		✓		✓
Audio-Begleitung		✓		✓
Blitz-Drucker		✓		✓
EMG			✓	✓
Biofeedback				✓

Weitere von Creo Medical produzierte und vertriebene Produkte

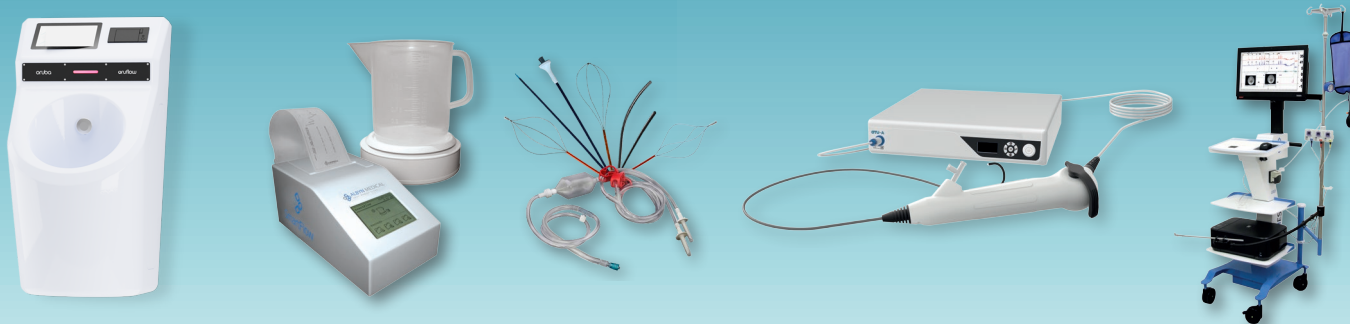

Beschreibung: Uroflow Urinal, **Indikation:** Uroflowmetrie, **Klasse:** Im, **Benannte Stelle:** UDEM, **Achtung:** Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Benutzerhandbuch. **Version:** UT_G_1. Rev. 01. Date: 30-08-22

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29
 40764 Langenfeld, Deutschland
Email: info.de@creomedical.com
Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

