


UroGuide

Fil Guide Hydrophile

5 modèles disponibles :



- ▶ 2 diamètres : 0,035" et 0,038".
- ▶ 2 extrémités : droite et courbée.
- ▶ 1 modèle à double extrémité souple : 1 droite et 1 courbée.

Conçu pour assurer
un accès rapide
aux voies urinaires
hautes.

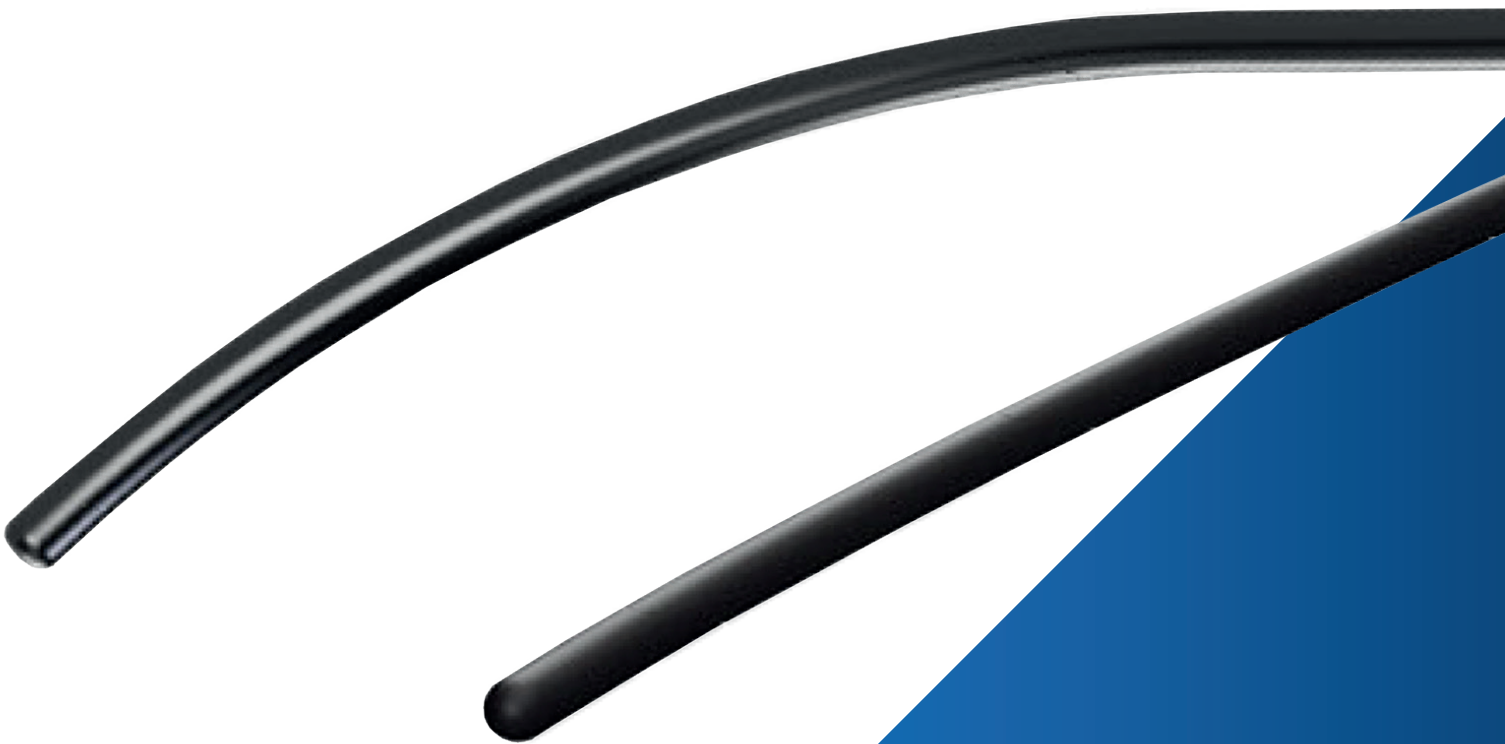


UroGuide

Fil Guide Hydrophile

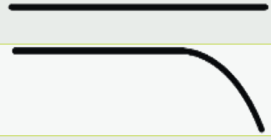Référence	Ø (Inch / mm)	Longueur (cm)	Longueur de l'extrémité flexible	Forme de l'extrémité flexible	CDT
UGW-035150-005	0,035 / 0,89	150	1 x 3 cm		5
UGW-038150-006	0,038 / 0,97	150	1 x 3 cm		5
UGW-035150-011	0,035 / 0,89	150	1 x 3 cm		5
UGW-038150-012	0,038 / 0,97	150	1 x 3 cm		5
UGW-035150-040	0,035 / 0,89	150	2 x 5 cm		5

Caractéristiques

- ▶ **Extrémité flexible conique** assurant une navigation **atraumatique**.
- ▶ **Revêtement hydrophile** pour une insertion et un avancement à faible friction.
- ▶ **Âme en nitinol** :
 - **Matériau souple, résistant à la déformation.**
 - **Bonne radio-opacité** assurant une bonne visibilité fluoroscopique pour une navigation contrôlée.
- ▶ **Étui protecteur du fil guide avec** :
 - **Raccord Luer-Lock** permettant d'humidifier facilement et intégralement le fil guide avant utilisation.
 - **Introduceur permettant de centrer et faciliter l'insertion** du fil guide dans la valve d'entrée du canal opérateur.

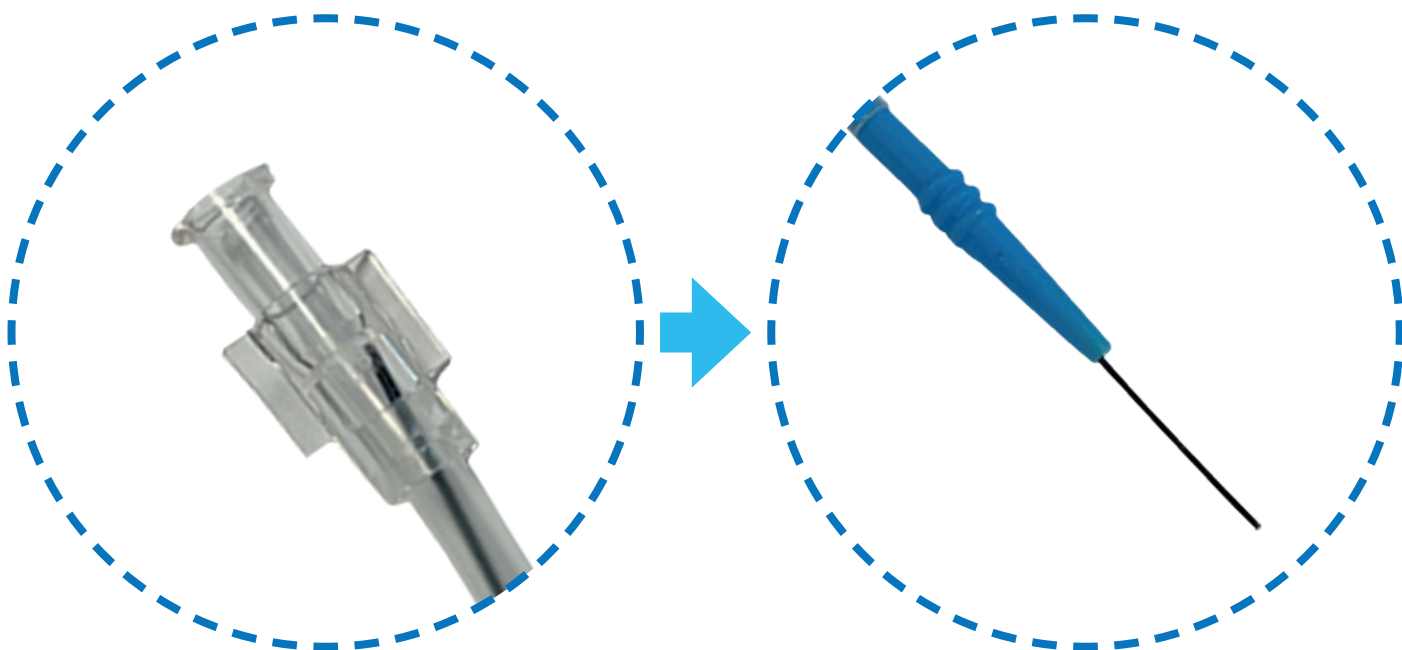

Dénomination : Fil guide hydrophile en nitinol UroGuide. **Indications** : Il est indiqué pour créer une voie qui peut être suivie pour permettre à un cathéter ou à un dispositif interventionnel similaire d'atteindre la zone où l'opération aura lieu (système urinaire). **Classe** : IIa. **Organisme notifié** : CE 1984. **Fabricant** : Plasti-Med Plastik Medikal Ürünler San.ve Tic.ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : UG_F_1. Rev.01 Date 18-11-2021

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

