


UroGuide

Guía Hidrofílica

5 modelos disponibles:

- ▶ 2 diámetros: 0.035" y 0.038".
- ▶ 2 extremos: straight y curved
- ▶ 1 referencia recta en un extremo y curva en el otro.

Diseñado para proporcionar un acceso rápido y una cómoda progresión de diversos dispositivos médicos.

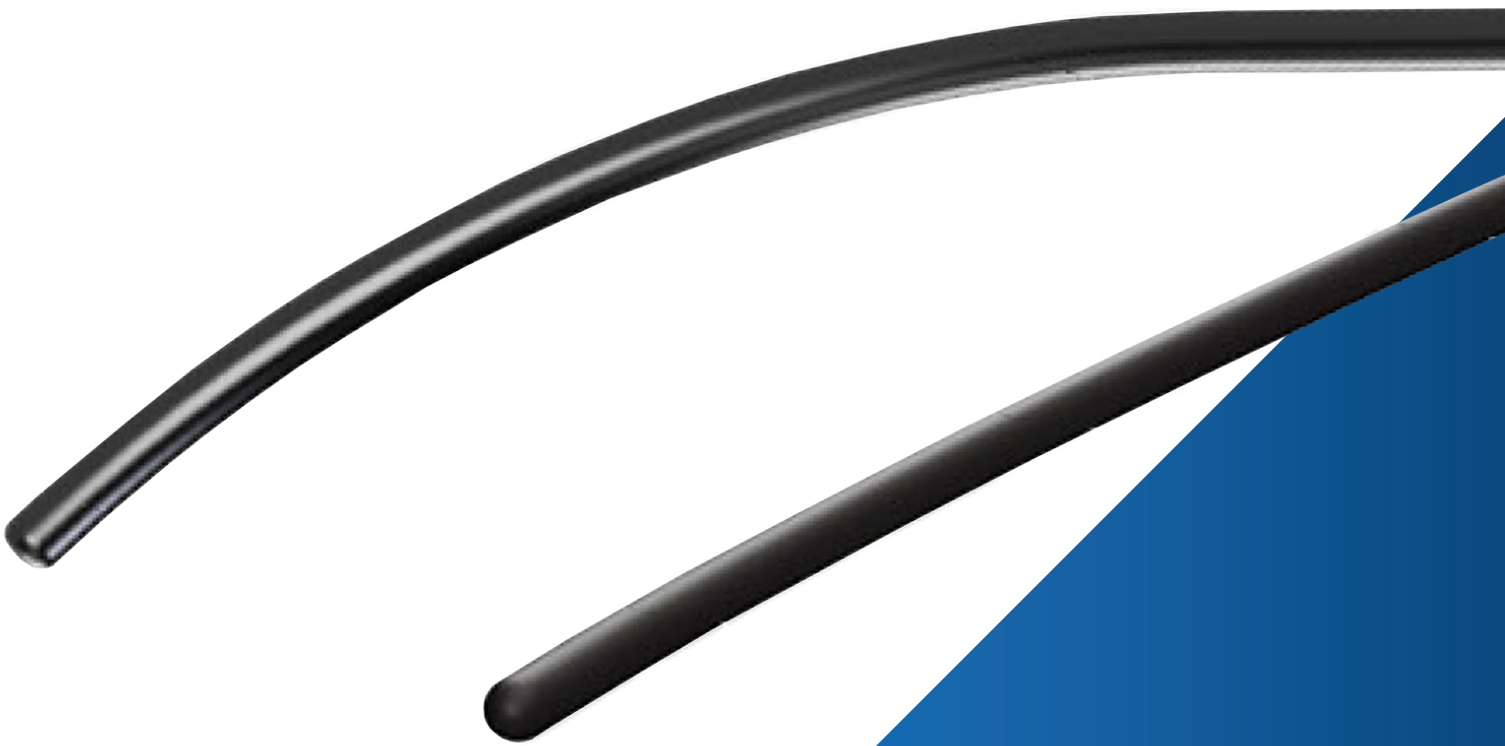


UroGuide

Guía Hidrofílica

Referencia	Ø (Pulgadas / mm)	Longitud (cm)	Longitud del extremo flexible	Forma del extremo flexible	Cant.
UGW-035150-005	0.035 / 0.89	150	1 x 3 cm		5
UGW-038150-006	0.038 / 0.97	150	1 x 3 cm		5
UGW-035150-011	0.035 / 0.89	150	1 x 3 cm		5
UGW-038150-012	0.038 / 0.97	150	1 x 3 cm		5
UGW-035150-040	0.035 / 0.89	150	2 x 5 cm		5

Características

- ▶ **Punta cónica flexible** para un movimiento **atraumático**.
- ▶ **Revestimiento hidrófilo** para una inserción y un avance de baja fricción.
- ▶ **Núcleo de nitinol:**
 - **Material flexible, resistente a la deformación.**
 - **Buena radiopacidad** que proporciona una buena visibilidad fluoroscópica para una exploración controlada.
- ▶ **Funda protectora de guía con:**
 - **Conexión Luer-Lock** para humectar fácil y completamente la guía antes de su uso.
 - **Introduccionador para centrar y facilitar la inserción** de la guía en la válvula de entrada del canal de trabajo.

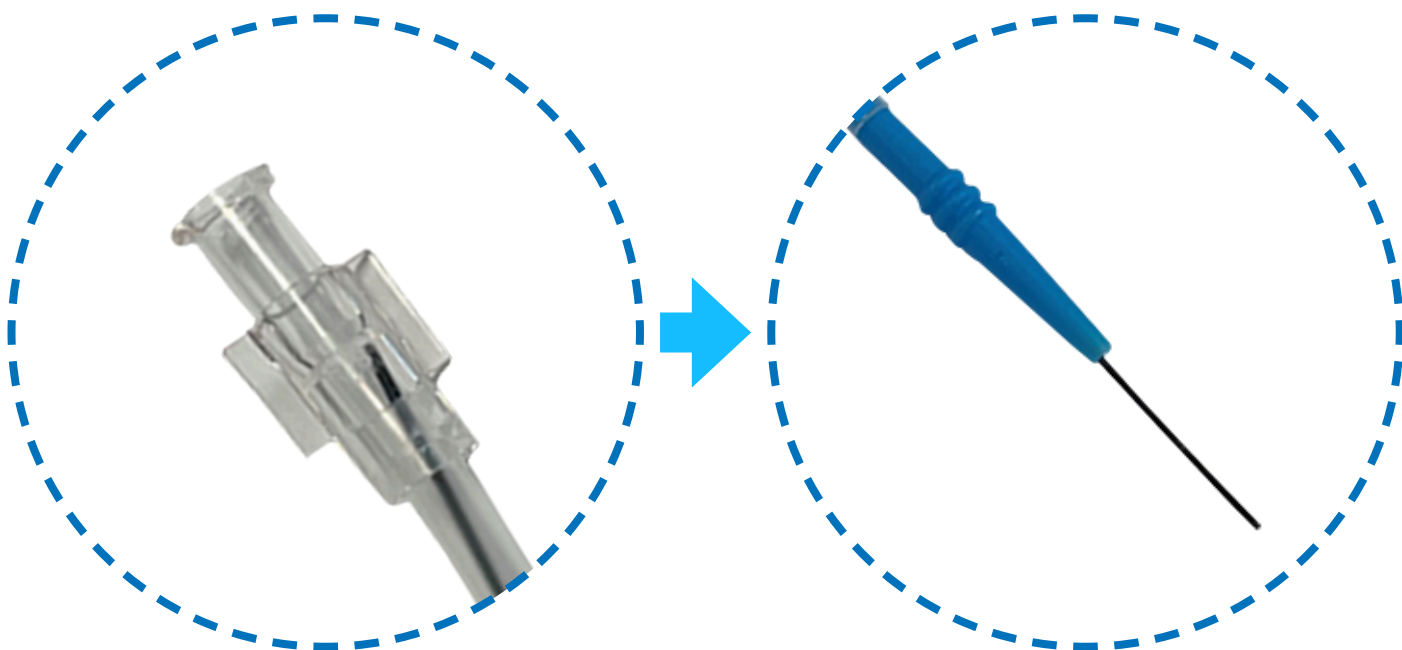

Descripción: Guía Hidrofílica UroGuide. **Indicaciones:** Está indicado para crear una vía que pueda seguirse para permitir que un catéter o un dispositivo de intervención similar llegue a la zona donde se va a operar (sistema urinario). **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE1984. **Fabricante:** Plasti-Med Plastik Medikal Ürünler San.ve Tic.Itd.Şti. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado del dispositivo. **Version :** UG_S_2. Rev.02 Date 24-02-23

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

