

# WiScope®


Urétéroscope numérique flexible à usage unique

Un matériel performant  
toujours opérationnel et  
disponible, qui élimine  
toutes les contraintes du  
réutilisable

Scannez ici



[Cliquez ici](#)

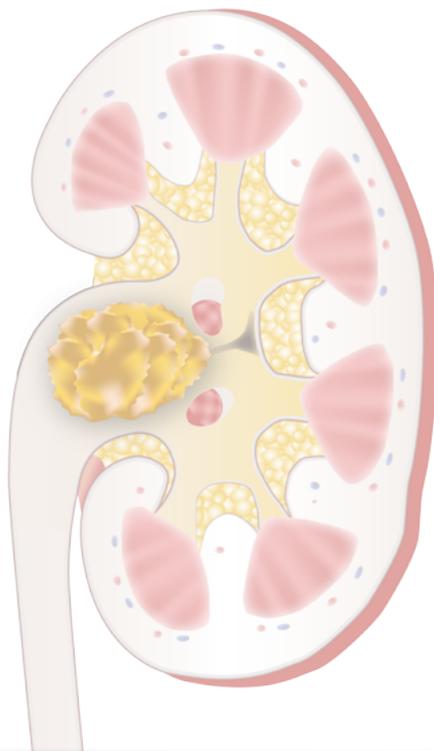

## Urétroscope numérique flexible à usage unique

Référence	Modèle	Ø gaine d'insertion (Fr / mm)	Ø canal opérateur (Fr / mm)	Longueur gaine (mm)	Compatibilité		CDT	QML
					Tablette	Processeur		
<b>Modèle fin</b>								
00060002	Ambidextre Inversé	7,5 / 2,50	3,6 / 1,2	670	✓	✓	1	5
<b>Modèle standard</b>								
00060003	Droitier Inversé	8,6 / 2,87	3,6 / 1,2	670	✓	✓	1	5
00060000	Droitier Standard							
00060004	Gaucher Inversé							
<b>Processeur d'Image</b>								
00060001	Système d'Image WiScope®						1	1
00060008	Tablette Médicale WiScope®						1	1

### Caractéristiques

- ▶ Disposez d'un **matériel performant, toujours disponible** et **100% fonctionnel** pour vos examens urétroscopiques. Outre sa disponibilité immédiate, l'urétroscope à usage unique **WiScope®** :
  - Ne nécessite **aucun investissement, aucune réparation, aucune maintenance, aucun contrôle microbiologique,**
  - Élimine les procédures de **décontamination** et de **stérilisation,**
  - Élimine les **risques de contaminations croisées,**
  - Offre les performances attendues tant en termes de **maniabilité** que de **qualité de vision,**
  - **Permet d'enchaîner rapidement les interventions** et de **gérer les urgences.**

- ▶ **Béquillage passif**
- ▶ **Excellente maniabilité**
- ▶ **Blocage automatique** du béquillage
- ▶ **Béquillage à 275° max.** dans les deux sens
- ▶ **Rayon de courbure court de 8mm**
- ▶ Permet le **passage des instruments** et **l'irrigation** tout au long de la procédure
- ▶ Résolution d'image de **400 x 400 pixels**
- ▶ Réglage de l'éclairage LED à plusieurs niveaux
- ▶ **Pointe distale rétrécie** et en forme de balle pour faciliter l'insertion
- ▶ **2 diamètres étroits de gaine d'insertion de 7,5 / 8,6 Fr facilitant la progression** et **minimisant les risques** de blessure au patient
- ▶ **Transmission 1 : 1** des mouvements de la poignée à l'extrémité distale

**Dénomination:** Urétroscope flexible numérique à usage unique WiScope®. **Indications:** accéder, visualiser et réaliser différentes procédures par voie endoscopique dans les voies urinaires et les reins. **Classe:** IIa. **Organisme notifié:** CE0123. **Fabricant:** Ningbo Wise OptoMech Technology Corporation. **Bon usage:** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement:** Produit non inscrit à la LPPR. **Version:** WS\_F\_8. Rev.08 Date 06-11-23

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

