

# WiScope®


Ureteroscopio digital flexible de un solo uso

Equipos de alto rendimiento  
siempre operativos y  
disponibles, que eliminan  
todas las limitaciones de la  
reutilización.

Escanee aquí



[Haga clic aquí](#)

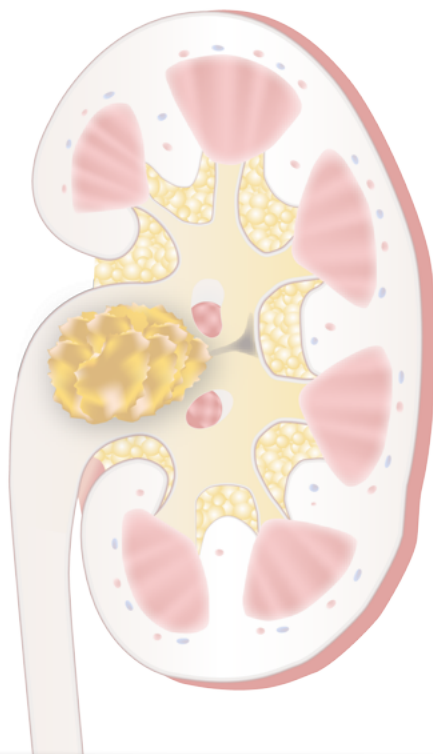

## Ureteroscopio digital flexible de un solo uso

Referencia	Modelo	Ø vaina de inserción (Fr / mm)	Ø canal de trabajo (Fr / mm)	Longitud (mm)	Compatibilidad		Cant. / caja
					Tablet	Procesador	
<b>Modelo fino</b>							
00060002	Ambidiestro inverso	7,5 / 2,50	3,6 / 1,2	670	✓	✓	1
<b>Modelo estándar</b>							
00060003	Diestro inverso	8,6 / 2,87	3,6 / 1,2	670	✓	✓	1
00060000	Diestro estándar						
00060004	Zurdo inverso						
<b>Procesador de Imagen</b>							
00060001	Sistema de Imágenes WiScope®						1
00060008	Tablet Médica WiScope®						1

### Características

- ▶ Obtenga equipos de alto rendimiento **siempre disponibles** y **100% funcionales** para sus exámenes ureteroscópicos. Además de su disponibilidad inmediata, el ureteroscopio de un solo uso WiScope® :
  - No requiere **inversiones, reparaciones, mantenimiento ni control microbiológico**,
  - Elimina los procedimientos de **descontaminación y esterilización**,
  - Elimina el **riesgo de contaminación cruzada**,
  - Proporciona el rendimiento esperado en términos de **manipulación y calidad de visión**,
  - **Permite una intervención rápida y la gestión de emergencias.**

- ▶ **Con función de flexión pasiva**
- ▶ Excelente maniobrabilidad
- ▶ Ángulo de desviación con **autobloqueo**
- ▶ **Desviación máxima de 275°** en dos direcciones
- ▶ **Radio de curvatura corto de 8 mm**

275° Down / 275° Up

- ▶ **Puerto de instrumentos**
- ▶ **Puerto de irrigación lateral**
- ▶ Permite el **paso de instrumentos e irrigación** durante todo el procedimiento

- ▶ Resolución de imagen de **400 x 400 píxeles**
- ▶ Ajuste de iluminación LED multinivel
- ▶ **Punta distal estrecha en forma de bala** para facilitar la inserción

LED / Sistema óptico (CMOS) / Canal de trabajo 3,6 Fr

8,6 Fr / 7,5 Fr

- ▶ 2 diámetros de vaina de inserción estrechos de **7,5 / 8,6 Fr** que **facilitan la progresión** y **minimizan el riesgo de lesiones** para el paciente
- ▶ **Transmisión 1:1** de los movimientos desde el mango hasta el extremo distal

**Descripción:** Ureteroscopio digital flexible de un solo uso WiScope®. **Indicaciones:** acceder, visualizar y realizar procedimientos en el tracto urinario y renal. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Uso del producto:** antes de usarlo, lea atentamente las Instrucciones de uso o la etiqueta del producto. **Version :** WS\_S\_6. Rev.06 Date 15-11-23

Distribuido en España por:

**Creo Medical S.L.**

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)  
Tel.: +34 948 293 324  
E-mail: info.es@creomedical.com

