

# ScopeClip

## Hemoclip voor éénmalig gebruik

Er zijn verschillende vorderingen gemaakt in deze nieuwste generatie hemostatische clips, met de volgende doelstellingen:


- ▶ Een betere grip op de weefsels.
- ▶ Een grotere sluitkracht.
- ▶ De mogelijkheid van extractie, indien nodig.




**Herpositioneerbaar**



**Roteerbaar**

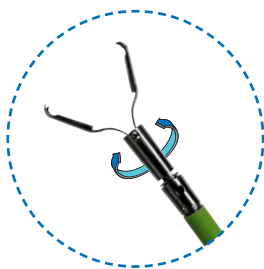

**Verwijderbaar**

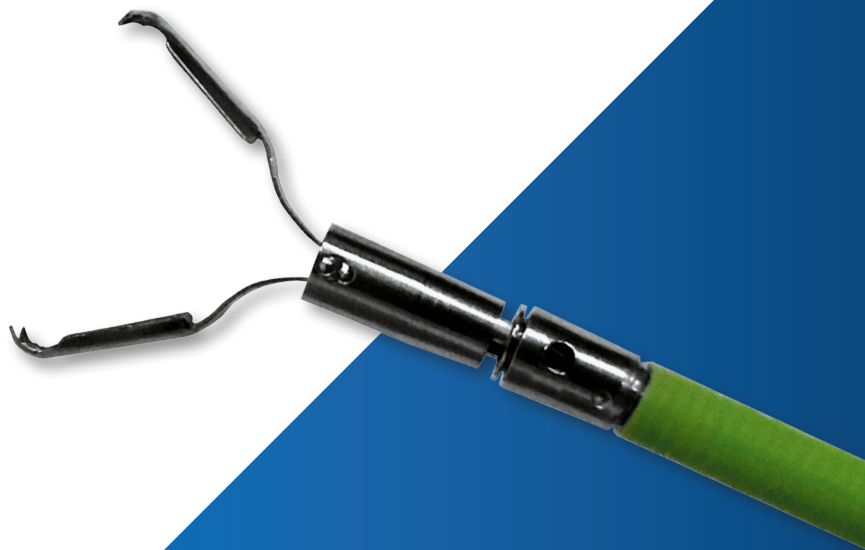

# ScopeClip

## Hemoclip voor éénmalig gebruik


### ScopeClip - Roterend, herpositioneerbaar en verwijderbaar voor éénmalig gebruik

Referentie	Clip opening (mm)	Cliphoek	Katheter Ø (mm)	Nuttige lengte (mm)	Kleurcode	AANTAL
HC-23091355108	9	135°	2,6	2300	Donkerblauw	10
HC-23111355104	11	135°	2,6	2300	Groen	10
HC-231313551018	13	135°	2,6	2300	Violet	10
HC-231613551044	16	135°	2,6	2300	Licht blauw	10

## Kenmerken



► **Draaibaar:** 360° rotatie in twee richtingen voor een betere invalshoek met een grotere beheersbaarheid en een exacte positionering.

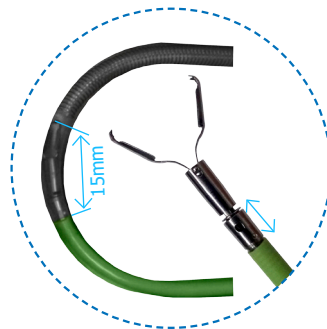

► **Korter distaal uiteinde:** om de progressie van de clip door het werkkanaal te vergemakkelijken wanneer de endoscoop sterk wordt gebogen.



► **Verplaatsbaar:** Mogelijkheid om de clip tot 5 keer te openen en te sluiten voor een nauwkeurigere positionering.



► **Betere weefselgreep en grotere sluitkracht:** Voorkomt weefsellekkage bij het sluiten van de clip en verhoogt de mate van weefselcompressie voor een betere vasculaire sluiting.



► **Verwijderbaar:** Indien nodig (de clip is verkeerd gepositioneerd, de clip raakt niet gemakkelijk los van de weefsels op een afstand van de plaatsing), de clip kan opnieuw worden geopend en verwijderd met een polypectomielus, zonder de weefsels te beschadigen.

### ScopeClip hemostatisch clip extractie handvat

Referentie	Ø Schede (mm)	Lengte (cm)	Ø Handvat (mm)	Vorm van de lus	Roterend	AANTAL
HPS-2425235075	2,4	230	25	Ovaal	✓	10

**Beschrijving:** Hemostatische clip voor éénmalig gebruik. **Indicates:** Endoscopische plaatsing van clips voor hemostasis of markering. **Klasse:** IIb. **Notified body:** CE0123. **Fabrikant:** Hangzhou AGS MedTech Co, Ltd. **Correct gebruik:** Lees voor gebruik zorgvuldig de instructies in de bijsluiter of op het etiket van het hulpmiddel. **Version:** SCL\_B\_3. Rev.03. Date 17-05-2023

Creo Medical erkende lokale distributeur

**Creo Medical SRL**

42, Rue des Vétérinaires-Veeartsenstraat,

Module B, 1070 Brussels, Belgium

**Email:** info.be@creomedical.com

**Tel:** +32 2 343 50 01

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.  
Afbeeldingen kunnen niet-standaardopties weergeven.

