

# ScopeSnare

## Poliepectomielus


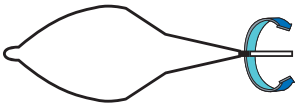
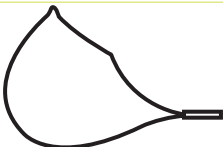
- ▶ **2 soorten: Standaard en Antislip.**
- ▶ **4 maten : 10, 15, 25 en 32 mm.**
- ▶ **Draaibaar.**
- ▶ **Verschillende snijdraaddiameters om te passen bij de resectiemethode.**




# ScopeSnare

## Poliepectomiëlus

### ScopeSnare - Poliepectomiëlus ovaal roteerbaar


	Referentie	mantel Ø (mm)	Lengte (cm)	Lus Ø (mm)	Ø snijdraad (mm)	Lus vorm	Roteerbaar	Aantal
	HPS-2410235075	2,4	230	10	0,30	Ovaal	✓	10
	HPS-2415235075	2,4	230	15	0,30	Ovaal	✓	10
	HPS-2425235075	2,4	230	25	0,41	Ovaal	✓	10
	HPS-2432235075	2,4	230	32	0,41	Ovaal	✓	10
	HPS-2410235076	2,4	230	10	0,30	Hexagonaal	✓	10
	HPS-2415235076	2,4	230	15	0,30	Hexagonaal	✓	10
	HPS-2415235079	2,4	230	15	0,30	Halve maan	✗	10
	HPS-2425235079	2,4	230	25	0,30	Halve maan	✗	10

### ScopeSnare - Anti-slip poliepectomiëlus ovaal roteerbaar

	Referentie	mantel Ø (mm)	Lengte (cm)	Lus Ø (mm)	Ø snijdraad (mm)	Lus vorm	Roteerbaar	Aantal
	HPS-2415235078	2,4	230	15	0,43	Rond	✓	10
	HPS-2425235078	2,4	230	25	0,43	Rond	✓	10

## Kenmerken

- ▶ **Roteerbaar**, om de positionering van de lus op de te verwijderen laesie te vergemakkelijken.
- ▶ **Standaard type**: Snijdraaddiameter aangepast aan de grootte van de lus voor een schone resectie.
  - 10 en 15 mm: gevlochten draad van **0,30 mm**
  - 25 en 32 mm: gevlochten draad van **0,41 mm**
- ▶ **Anti-slip type**: Uniek gevlochten ontwerp van de lus om wrijving op het slijmvlies te verhogen en wegglijden te voorkomen wanneer de laesie wordt gevangen.

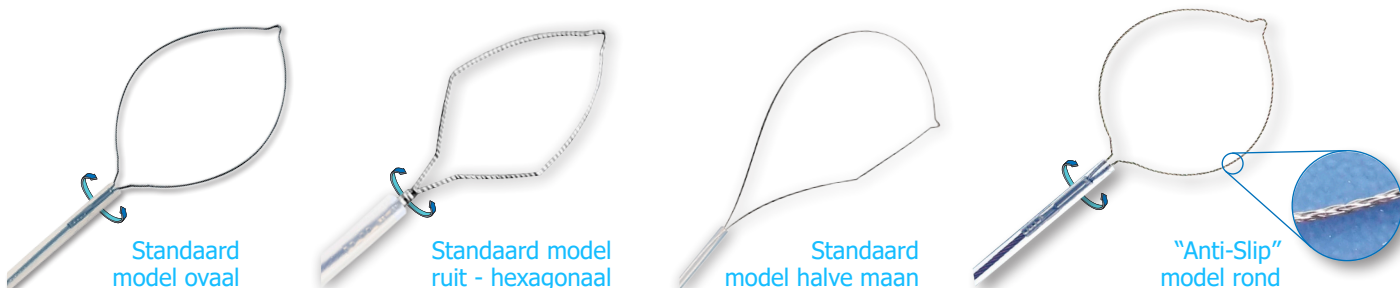

**Omschrijving:** Poliepectomie lus. **Indicaties:** Endoscopische resectie van kleine poliepen, sesiele poliepen, gecompliceerde poliepen en weefsel in het maagdarkanaal. **Klasse:** IIb. **Notified body:** Ce0123. **Fabrikant:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Correct gebruik:** Lees voor gebruik zorgvuldig de instructies op de bijsluiter of het etiket van het hulpmiddel. **Version:** SS\_B\_1. Rev.01. Date 21-02-23

Creo Medical erkende lokale distributeur

**Creo Medical SRL**

42, Rue des Vétérinaires-Veeartsenstraat,

Module B, 1070 Brussels, Belgium

Email: info.be@creomedical.com

Tel: +32 2 343 50 01

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.  
Afbeeldingen kunnen niet-standaardopties weergeven.

