


ScopeXtract

Drievoudig lumen Gal Extractie Ballon

Ontworpen om stenen uit het galkanaal te verwijderen of om de injectie van contrast media te vergemakkelijken.




ScopeXtract - Extractie ballon
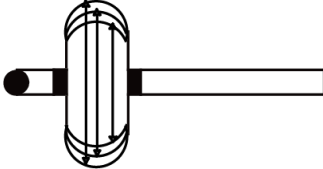
| | Referentie | Ø Katheter (Fr / mm) | Lengte (cm) | Ø opgeblazen ballon (mm) | Compatibel met korte geleidingsdraad | Aantal |
|---|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|
|  | SEB-1012155451 | 7 - 5 / 2,3 - 1,7 | 200 | 10 - 12 - 15 | ✗ | 5 |
| | SEB-1315185451 | 7 - 5 / 2,3 - 1,7 | 200 | 13 - 15 - 18 | ✗ | 5 |
| | SEB-1012155453 | 7 - 5 / 2,3 - 1,7 | 200 | 10 - 12 - 15 | ✓ | 5 |
| | SEB-1315185453 | 7 - 5 / 2,3 - 1,7 | 200 | 13 - 15 - 18 | ✓ | 5 |

Kenmerken

- ▶ **3 lumen:** geleidingsdraad - injectie - balloninflatie
- ▶ **1 ballon = 3 diameters**
- ▶ Verkrijgbaar in **standaard** of **kort geleidingsdraadmodel**
- ▶ De **platoïde vorm van de ballon** vermindert het oppervlak in contact met de wanden van het galkanaal, zodat :
 - om wrijving en dus weerstand tegen krimpen te verminderen,
 - om het merendeel van de stenen in één keer te verwijderen.
- ▶ De **ballon vervormt niet gemakkelijk**, waardoor laterale lekkage tijdens de extractie wordt voorkomen.
- ▶ Het **conische ontwerp van de katheterpunt** zorgt voor een eenvoudige cannulatie van de papilla.

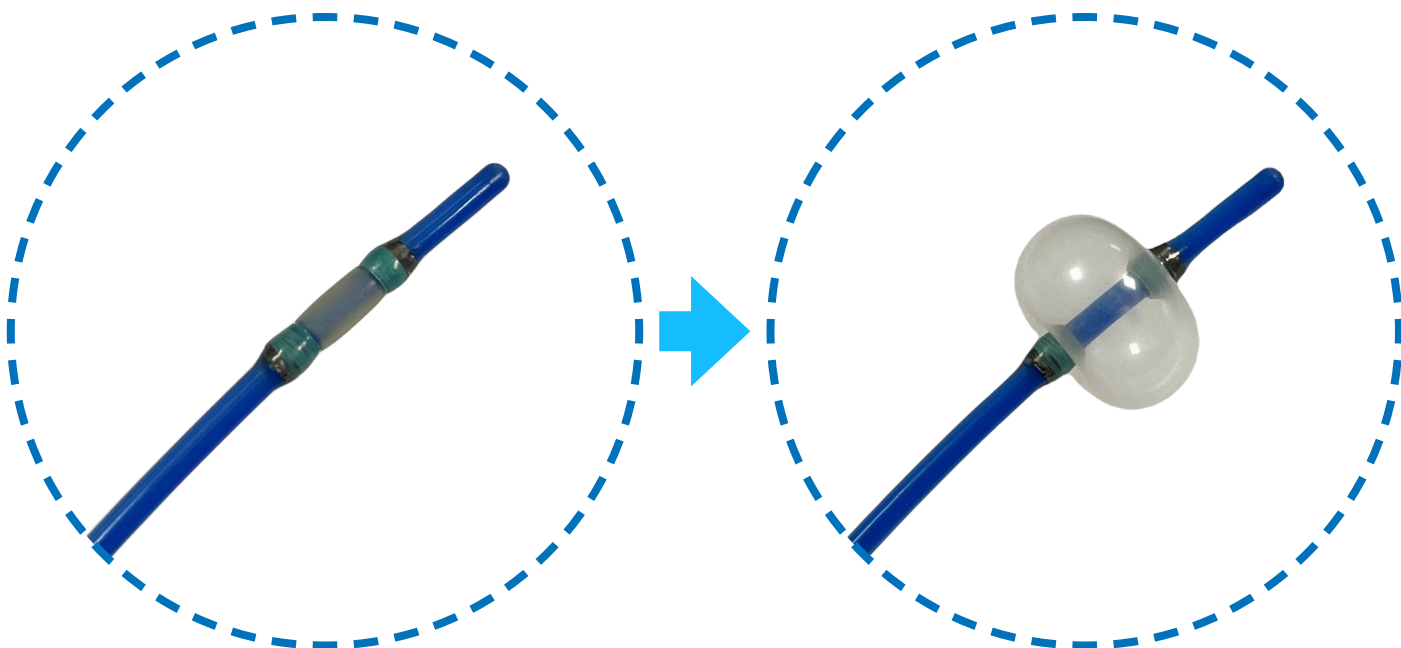

Omschrijving: ScopeXtract extractie ballon. **Indicaties:** Endoscopisch verwijderen van galstenen. **Klasse:** IIa. **Notified body:** CE0123. **Fabrikant:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Correct gebruik:** Lees voor gebruik zorgvuldig de instructies in de bijsluiter of op het etiket van het hulpmiddel **Version :** SX_B_1. Rev.01. Date 21-02-23

Creo Medical erkende lokale distributeur

Creo Medical SRL

42, Rue des Vétérinaires-Veeartsenstraat,

Module B, 1070 Brussels, Belgium

Email: info.be@creomedical.com

Tel: +32 2 343 50 01

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Afbeeldingen kunnen niet-standaardopties weergeven.